


SEIRIN PYONEX NEEDLES




SEIRIN CORPORATION

1007-1 Sodeshi-cho, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, 424-0037, Japan

<https://www.seirin.jp>

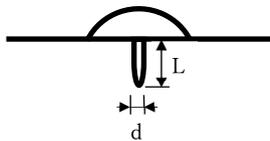

L (mm)	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
d (mm)	0.11	0.15	0.17	0.20	0.20

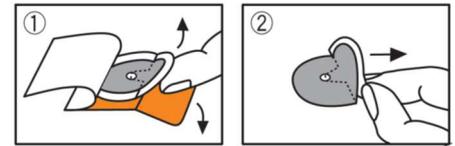

de SEIRIN PYONEX NADEL

<Richtlinie> Dieses Produkt entspricht der ISO-Norm 18746 Sterile intradermale Akupunkturnadeln zum einmaligen Gebrauch.

[Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Indikationen]

Dieses Produkt ist zur Verwendung für Akupunktur.

Dieses Produkt darf nur von autorisierten praktischen Ärzten (Fachärzten) verwendet werden.

[Vorsichtsmaßnahme bei der Verwendung (Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Nadeln bei folgenden Patienten verwenden.)]

- Schwangere (Es können Wehen eingeleitet werden.)
- Patienten mit malignen Tumoren (Das Wachstum oder die Metastasierung von bösartigen Tumoren kann beschleunigt werden.)
- Patienten mit hämorrhagischen Erkrankungen (Es kann zu Blutungen kommen.)
- Patienten mit Allergien gegen Metalle wie Nickel, Chrom und andere Edelstahlkomponenten

[Verwendungsmethode] ·Die Nadeln sind sehr scharf. Gehen Sie vorsichtig mit ihnen um, um Verletzungen zu vermeiden.

- 1) **Bestätigung:** Vergewissern Sie sich, dass die Sterilverpackung nicht beschädigt, kontaminiert oder feucht ist, und verwenden Sie sie nicht, wenn dies der Fall ist.
- 2) **Einmalgebrauch:** Diese Seirin-Akupunkturnadeln sind sterilisierte Einwegartikel und nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Wiederverwendung erhöht das Risiko einer Infektion.
- 3) **Desinfektion:** Wischen Sie die Akupunkturstelle mit in Alkohol getränkter Watte o. ä. ab und lassen Sie sie vor dem Einstechen der Nadel trocknen.
- 4) **Sichtprüfung:** Überprüfen Sie die Nadel unbedingt vor Verwendung. Verwenden Sie sie nicht, wenn sie Unregelmäßigkeiten, wie z. B. Verdrehungen oder Beschädigungen, aufweist.
- 5) **Öffnen der Verpackung und Entnehmen des Produkts ①:** Entfernen Sie die Deckeldichtung von der Kunststoffbox und heben Sie die halbmondförmige Lasche zusammen mit dem Klebeband an, wie in der Abbildung gezeigt. Sie können die Kunststoffbox leicht mit den Fingern wieder zusammenfallen.
- 6) **Applikation ②:** Heben Sie die halbmondförmige Lasche zusammen mit dem Klebeband an, um die Nadel (Pyonex) auf die Haut aufzusetzen, ohne den Kleber des Bandes und die Nadelspitze zu berühren. Entfernen Sie anschließend die Lasche und drücken Sie das Klebeband an.
- 7) **Nach Gebrauch:** Entsorgen Sie die Nadeln auf sichere Weise, um eine Infektion zu vermeiden. Wenn die Nadeln nach dem Öffnen der Verpackung nicht benutzt werden, verwenden Sie sie nicht und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
- 8) Das Material der Nadel verträgt nicht die bei Moxibustion entstehende Hitze. Führen Sie keine Moxa-Wärmebehandlung auf dem Klebeband durch.
- 9) Diese Nadel ist nicht für Elektrotherapie geeignet. Verwenden Sie sie nicht zur elektrischen Stimulation.
- 10) Weisen Sie den Patienten an, das Klebeband von der Haut zu entfernen, bevor er duschen, baden oder schwimmen geht, da es sich leicht ablöst.
- 11) Weisen Sie den Patienten an, Tätigkeiten zu vermeiden, die die Stelle belasten, an der das Klebeband angebracht ist.

[Nebenwirkungen] Der Patient kann Schmerzen, Juckreiz, Schläfrigkeit, Unwohlsein Übelkeit, Rötung, Schwellung und Blasenbildung verspüren.

Wenn im Behandlungsbereich eine abnorme Reaktion auftritt, wie z. B. Rötung oder Juckreiz, weisen Sie den Patienten an, nach dem Entfernen der Nadel einen autorisierten Arzt für Akupunktur aufzusuchen.

[Aufbewahrung] Bewahren Sie die Nadeln an einem sicheren Ort auf, der vor Wasseraustritt, direkter Sonneneinstrahlung, hoher Luftfeuchtigkeit und hohen Temperaturen, Chemikalien und Kindern geschützt ist.

[Verfallsdatum] Das Verfallsdatum (basierend auf internen Tests) ist auf der Verpackung angegeben. Prüfen Sie vor Verwendung das Verfallsdatum und verwenden Sie keine abgelaufenen Produkte.

Melden Sie alle schwerwiegenden Ereignisse im Zusammenhang mit diesem Produkt dem Hersteller und den Gesundheitsbehörden des Mitgliedsstaates, in dem der Anwender und/oder Patient wohnt.

What is Lot? Lot=07525A1 = 07 5 25 A1 = Date of manufacture ①Last 2 digits of the year ②month (X=10 Y=11 Z=12) ③day ④Manufacture control No.