

빠른 시작 가이드


소아 ALS 시뮬레이터 Atlas Baby를 구매해 주셔서 감사합니다.

Atlas Baby를 REALiTi 360에 연결하기: 간단한 가이드

시나리오 1: 기존 Wi-Fi 라우터의 이름은 iSimulate-5.0

1. 시나리오 1: 기존 Wi-Fi 라우터의 이름은 iSimulate-5.0입니다.
2. Wi-Fi 연결: REALiTi Monitor iPad와 Control iPad가 모두 iSimulate-5.0 네트워크에 연결되어 있는지 확인하세요.



WiFi 이름: iSimulate-5.0
비밀번호: iSimulate2012

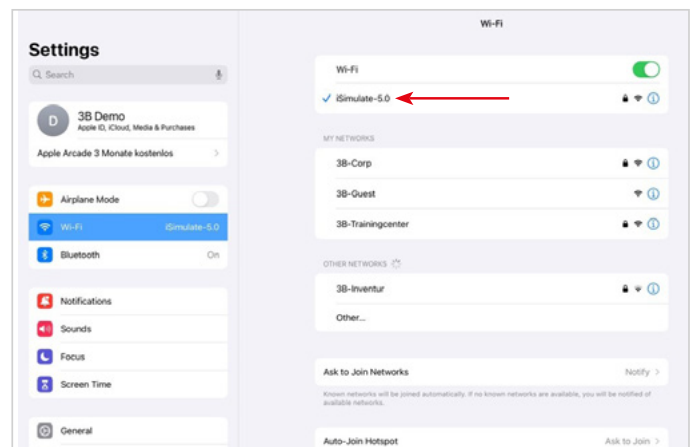

3. Atlas Baby 켜기: 마네킹 뒷면의 전원 버튼을 찾아 누릅니다. 그러면 자동으로 iSimulate-5.0 네트워크에 연결됩니다. 연결이 성공하면 전원 버튼이 노란색에서 녹색으로 바뀝니다.




4. REALiTi 앱 실행: 두 iPad에서 REALiTi 앱을 열고 모니터에서 'Staging'을 선택하고 제어 iPad에서 'Control'를 선택합니다.

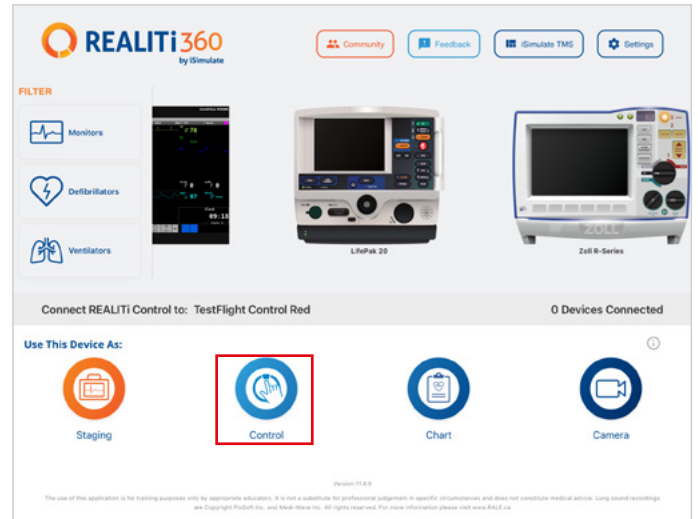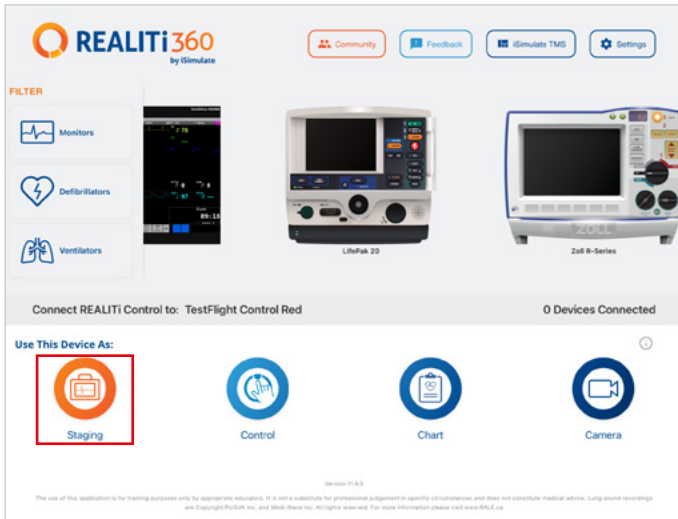


5. iPad 연결: Control iPad의 'Tap to Connect' 기능을 사용하여 두 기기를 연결합니다.


Monitor iPad가 목록에 나타나지 않으면 Staging iPad와 Monitor iPad가 모두 REALiTi 라우터의 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인하세요: iSimulate-5.0(두 iPad 모두 동일한 Wi-Fi 네트워크에 있어야 함).

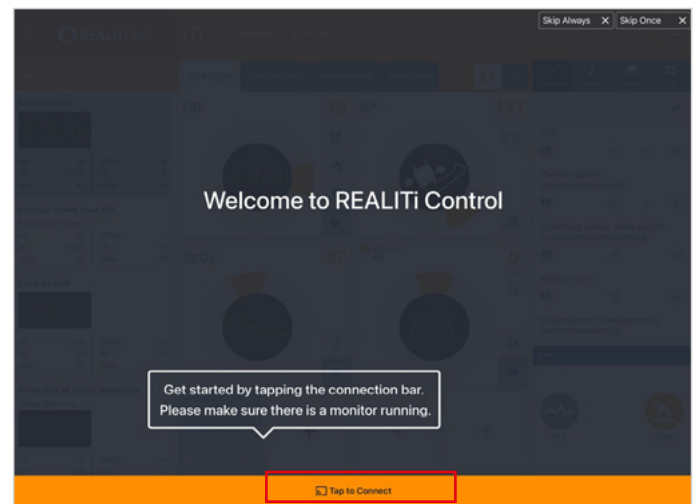

6. 시나리오 선택 및 시작: Control iPad에서 시나리오 또는 모니터 설정을 선택하여 시작합니다.


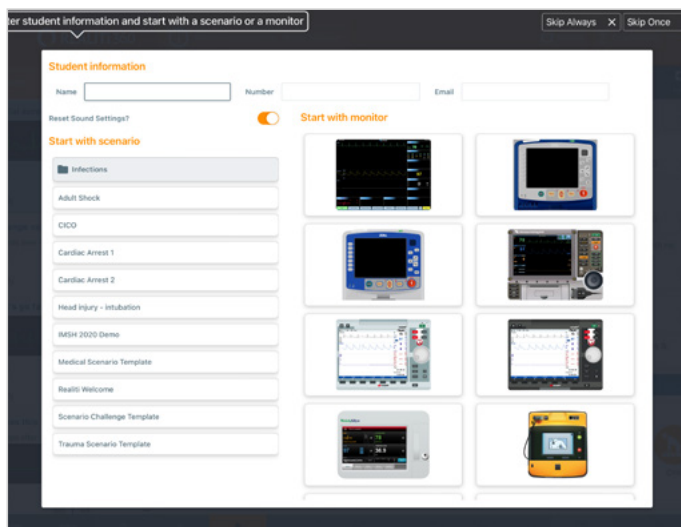


7. 시나리오나 모니터를 선택하고 'Start' 버튼을 탭합니다. iPad의 메인 메뉴에서 제세동기를 시작합니다.

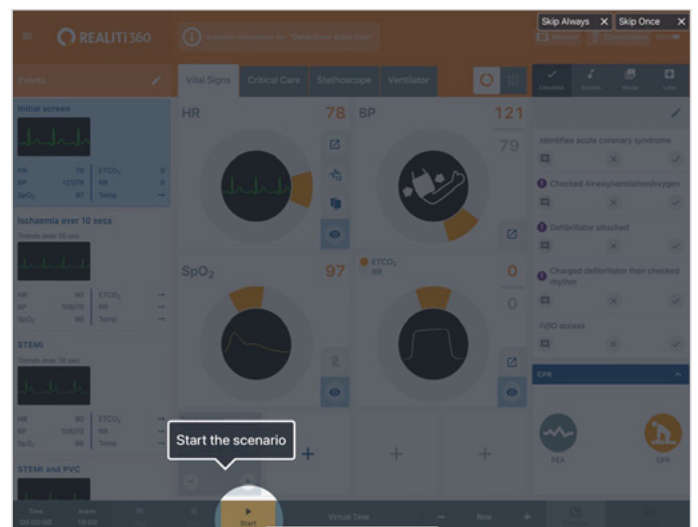


8. Monitor iPad에서 7단계에서 선택한 시나리오 또는 모니터가 나타납니다. 제세동기를 시작합니다.

9. Atlas Baby 검색: Monitor iPad의 오른쪽 화면 가장자리에서 살짝 밀고 “Rescan Devices”를 탭하여 “Available Devices”를 표시합니다.

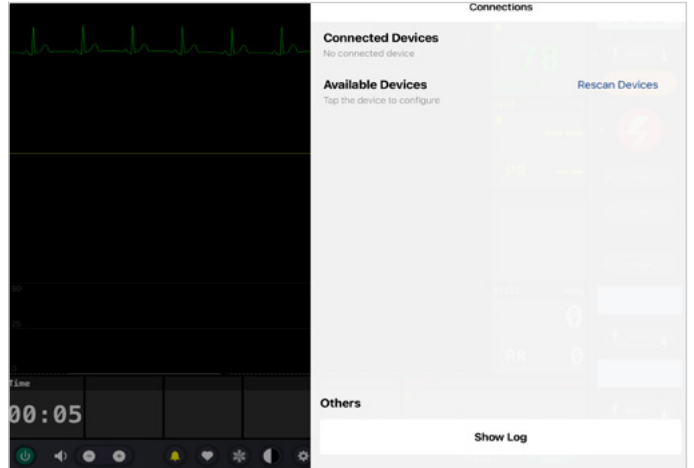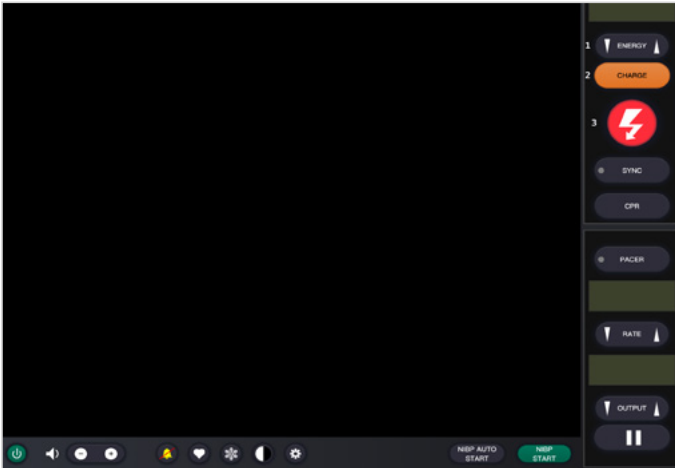

10. 사용 가능한 기기에서 ‘Connect Device’을 탭하여 ‘Atlas Baby’를 선택합니다. 연결된 Atlas Baby는 자동으로 교정됩니다.


11. 시뮬레이션 시작: 마네킹을 압축합니다. ECG 파형과 막대 그래프에서 CPR 압축을 볼 수 있습니다.

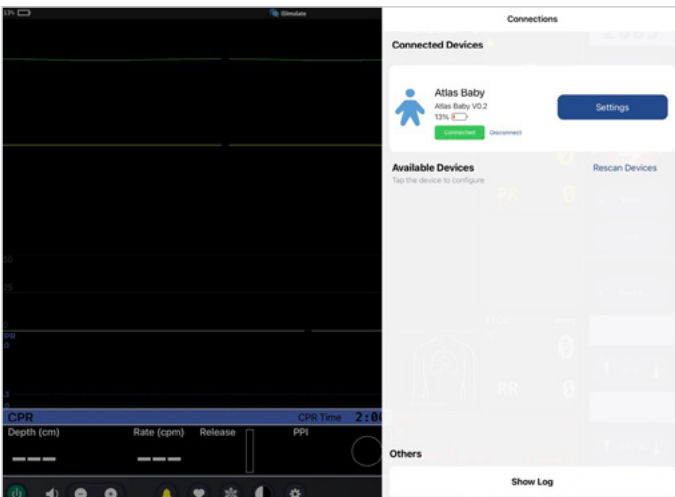

시나리오 2: 기존 Wi-Fi 라우터가 iSumlate-5.0이 아닙니다.



1. Bluetooth 설정: Monitor iPad에서 Bluetooth를 켜고 Atlas Baby에 연결합니다.

2. REALITI 앱 실행: Monitor iPad에서 REALITI 앱을 시작하고 ‘Staging’ 버튼을 선택합니다.

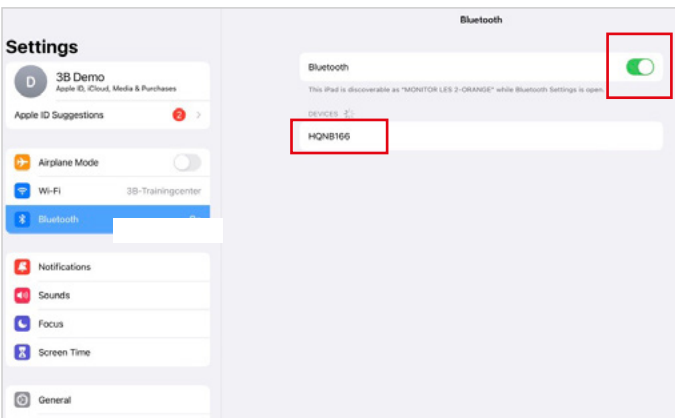



3. Atlas Baby 스캔: Monitor iPad의 오른쪽 가장자리에서 스 와이프하여 'Available Devices' 메뉴를 표시합니다. 'Rescan Devices'을 선택하고 'Connect Device'을 탭하여 목록에서 'Atlas Baby Wi-Fi Config'을 선택합니다.

4. 'Atlas Baby Wi-Fi Config'에 성공적으로 연결되면 'Settings'에 액세스합니다.

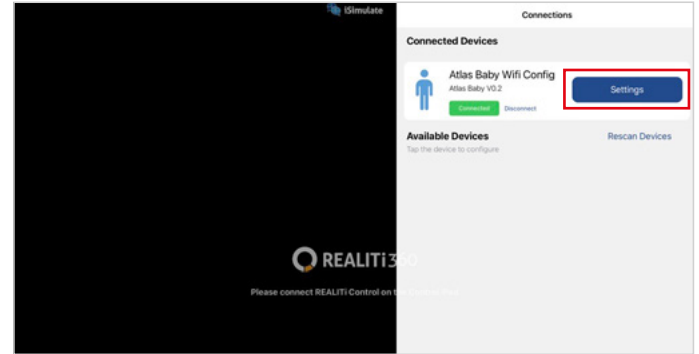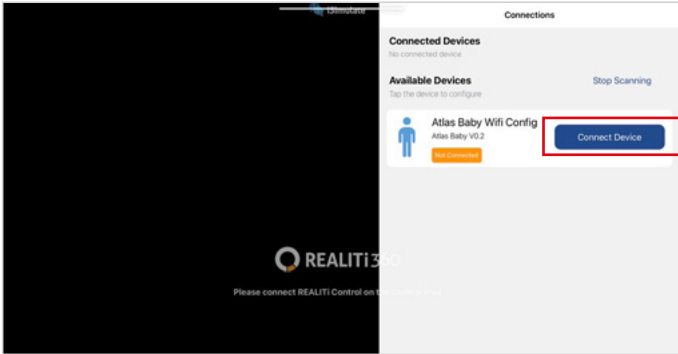

5. Wi-Fi SSID 이름 변경: Atlas Wi-Fi 설정이 표시되어 라우터와 일치하도록 Wi-Fi 네트워크 이름을 사용자 지정할 수 있습니다. Wi-Fi SSID(이름)와 비밀번호가 모두 Wi-Fi 라우터와 일치하는지 확인합니다.

6. 원하는 Wi-Fi SSID와 비밀번호를 입력한 후 'Save Settings'을 탭하여 변경 사항을 Wi-Fi 구성에 성공적으로 적용합니다.

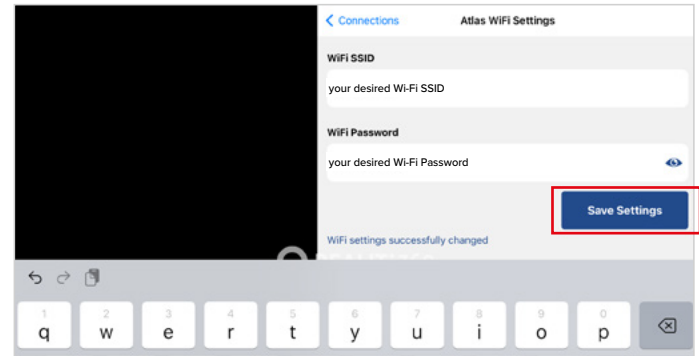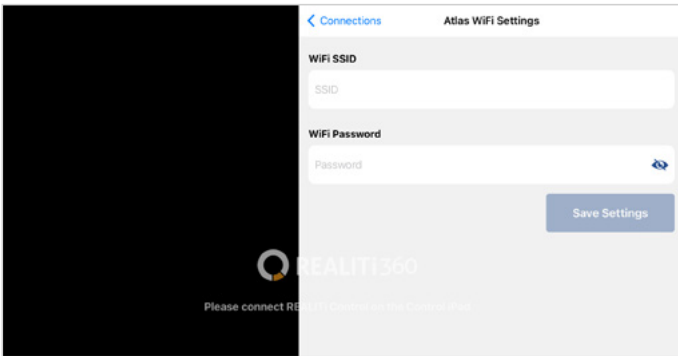


7. 홈 버튼을 두 번 탭하여 앱을 종료하고 앱의 미리보기 카드를 위로 스 와이프하여 닫습니다.

8. Atlas Baby를 끄세요.

9. Monitor iPad와 Staging iPad를 라우터의 Wi-Fi 네트워크에 연결합니다. 두 iPad 모두 동일한 Wi-Fi 네트워크에 있어야 합니다.

10. 시나리오 1의 3단계부터 11단계까지 수행합니다.

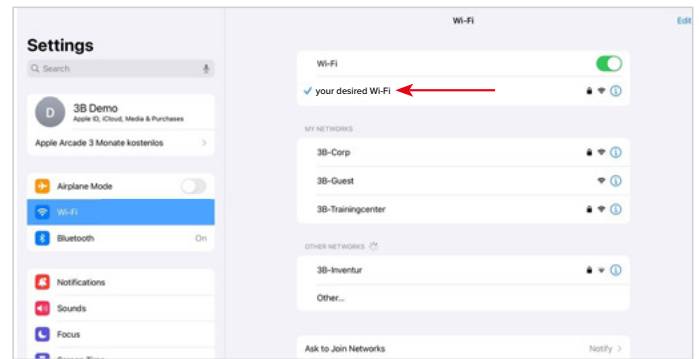

 Atlas 아기가 시작할 준비가 되었습니다!



03/2025



3B Scientific GmbH • Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany • 3bscientific.com

Phone: +49 40 73966-0 • Fax: +49 40 73966-100 • E-mail: info@3bscientific.com