

Gyorsindítási Útmutató

Köszönjük, hogy megvásárolta az Atlas – a ALS szimulátor


Az Atlas és a REALITi 360 összekapcsolása: Egyszerű útmutató

1. szcenárium: A meglévő Wi-Fi router neve iSimulate-5.0

1. **Bekapcsolás:** Kezdje az iSimulate-5.0 router bekapcsolásával.

2. **Wi-Fi csatlakozás:** Győződjön meg arról, hogy a REALITi Monitor iPad és a Control iPad is csatlakozik az iSimulate-5.0 hálózathoz.



WiFi neve: iSimulate-5.0
Jelszó: iSimulate2012

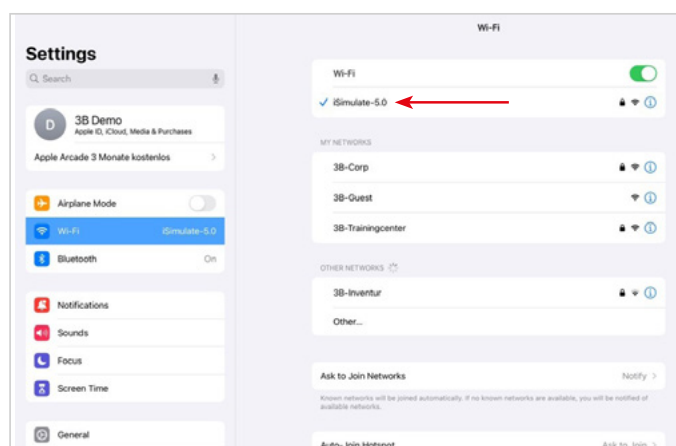

3. **Kapcsolja be az Atlas:** Keresse meg és nyomja meg a bekapcsoló gombot a tanbábu jobb oldalán, amely automatikusan csatlakozik az iSimulate-5.0 hálózathoz.




4. **Indítsa el a REALITi alkalmazást:** Nyissa meg a REALITi alkalmazást mindkét iPaden, és válassza ki a „Staging” lehetőséget a monitoron és a „Control” elemet a Control iPaden.

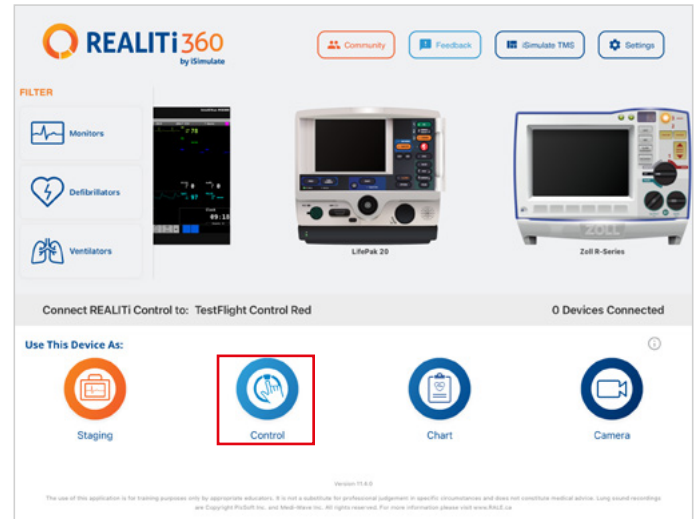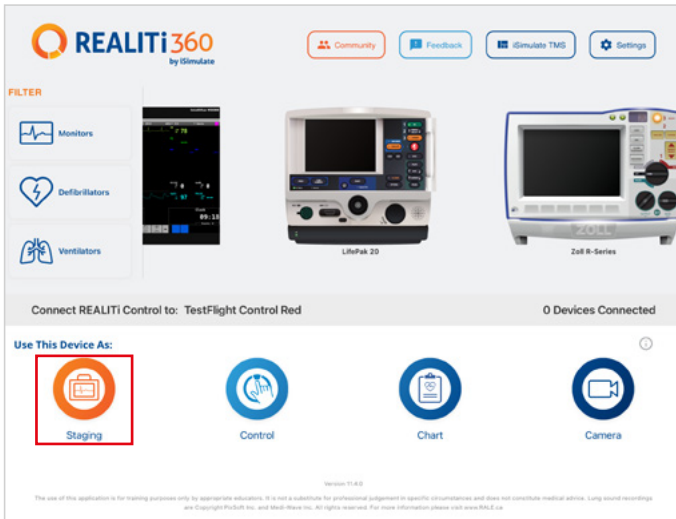


5. **iPad csatlakoztatása:** Mindkét eszköz összekapcsolásához használja a Control iPad „Tap to Connect” funkcióját.


Ha a monitorozó iPad nem jelenik meg a listában, ellenőrizze, hogy a szakaszoló iPad és a monitorozó iPad egyaránt csatlakozik-e a REALITi router Wi-Fi hálózatához: iSimulate-5.0 (mindkét iPadnek ugyanabban a Wi-Fi hálózatban kell lennie).

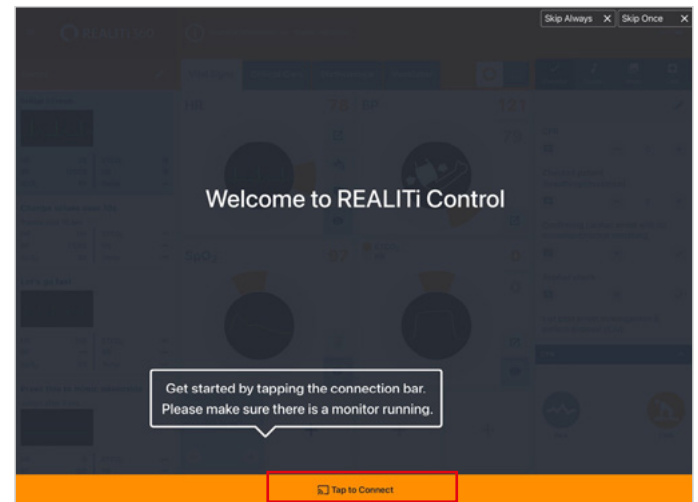

6. **Válasszon ki és indítson el egy szcenáriumot:** Az iPad vezérlőjében válasszon ki egy szcenáriumot vagy monitorbeállítást a kezdéshez.


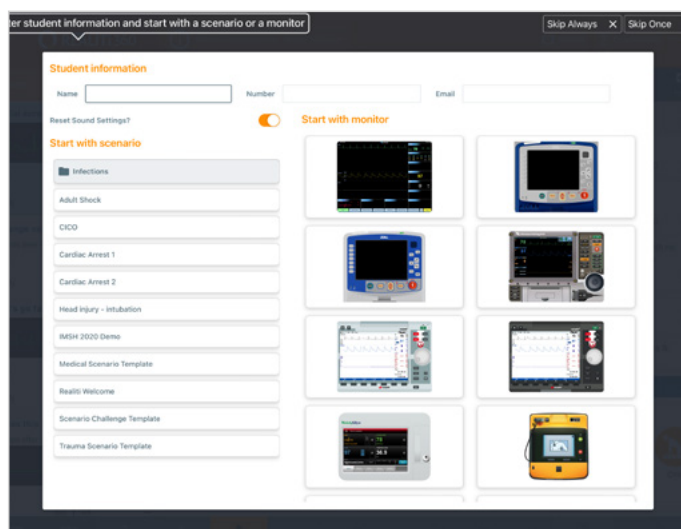


7. **Válasszon ki egy szcenáriumot vagy monitor, és koppintson a „Start” gombra.** Indítsa el a defibrillátort az iPad főmenüjéből:

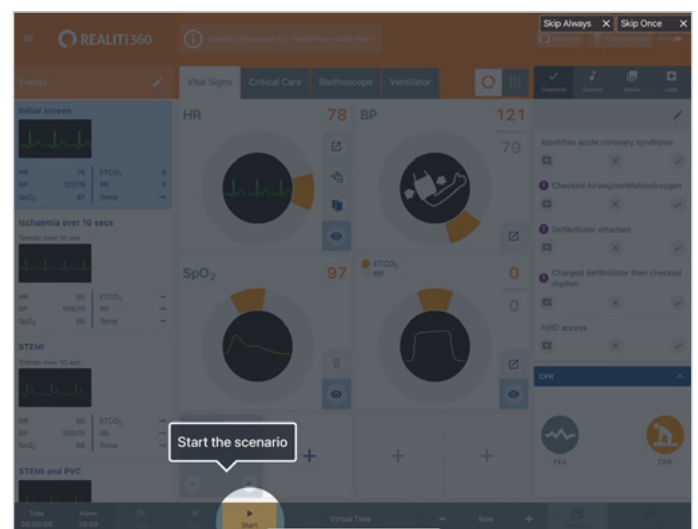


8. Az iPad monitorján meg kell jelennie a 7. lépésben kiválasztott scenáriumnak vagy monitornak. Indítsa el a defibrillátort.

9. **Az Atlas keresése:** Csúsztassa befelé az ujját az iPad monitor képernyőjének jobb szélétől az „Available Devices” megjelenítéséhez.

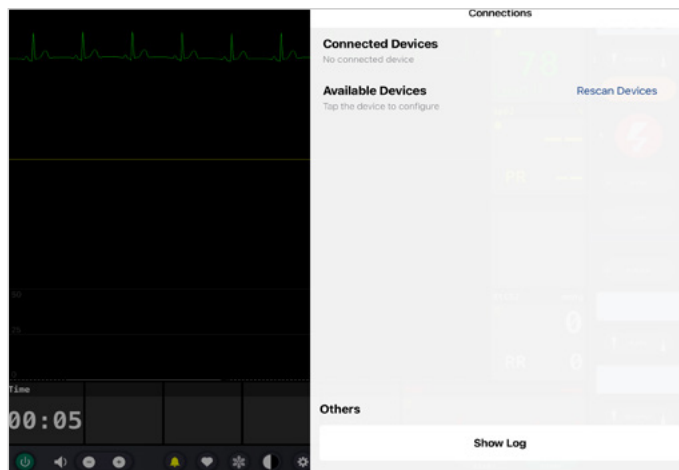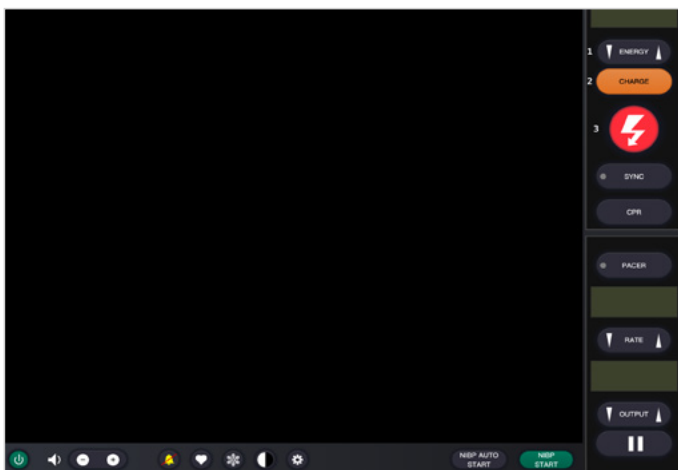


10. Koppintson a „Rescan Devices” lehetőségre. A rendelkezésre álló eszközök közül válassza ki az „Atlas” lehetőséget a „Connect Device” lehetőségre koppintással. A csatlakoztatott Atlas automatikusan kalibrálásra kerül. A tanbábu a carotis pulzust szimulálja.

11. **Szimuláció indítása:** Nyomja össze a tanbábut. Az EKG hullámformán és a sávdiaagramon látni fogja a CPR-kompressziót.

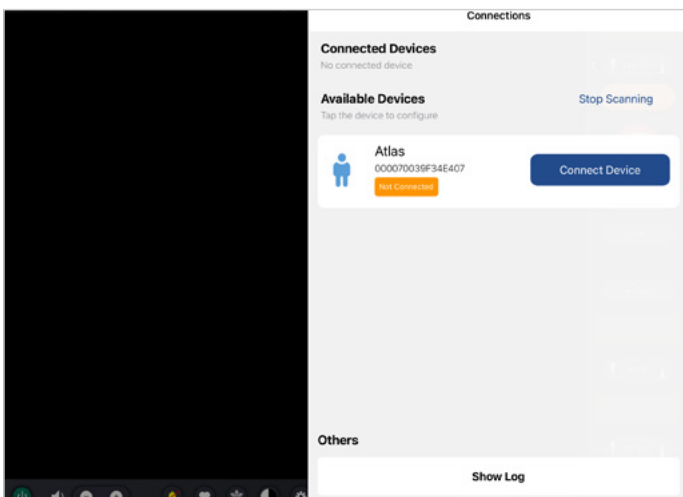


2. scenárium: A meglévő Wi-Fi router neve nem iSimulate-5.0


1. **Mini router:** Kapcsolja be a mini router PIX-Linket, amelyet az ATLAS szállítási tartalma tartalmaz.
2. **Wi-Fi kapcsolat:** Győződjön meg róla, hogy a REALITI Monitor iPad csatlakozik az iSimulate-5.0 hálózathoz.
3. **Turn On Atlas:** Ez automatikusan csatlakozik az iSimulate-5.0 hálózathoz.

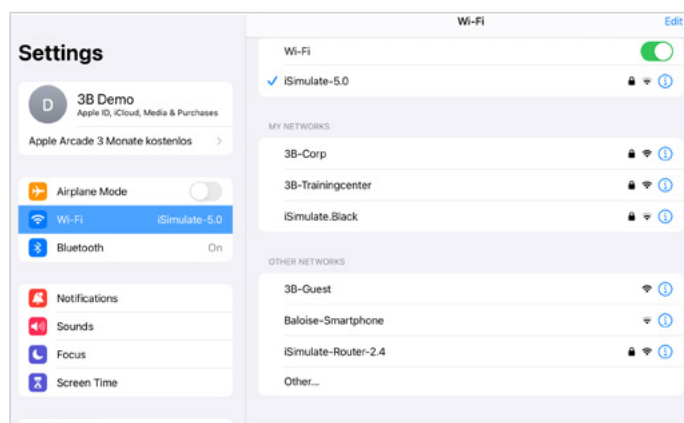


3. **Az Atlas keresése:** húzza befelé az ujját az iPad monitorjának jobb szélétől az „Available Devices” menü megjelenítéséhez. Válassza a „Rescan Devices” lehetőséget, majd válassza az „Atlas Wi-Fi Config” lehetőséget a listából a „Connect Device” lehetőségre kattintással.

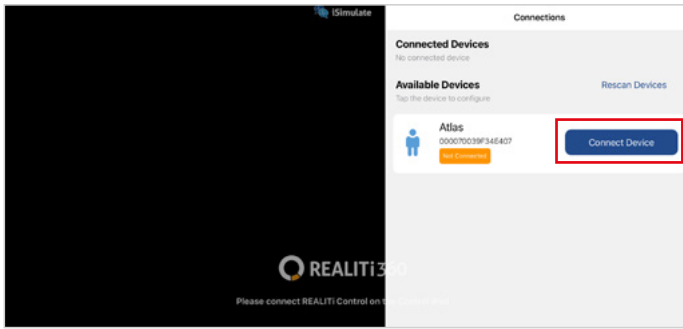


4. Ha sikeresen csatlakozik az „Atlas” opcióhoz, nyissa meg a „Settings” menüpontot.

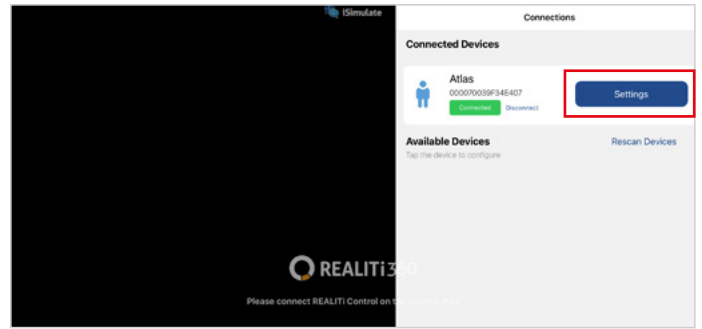

5. **A Wi-Fi SSID átnevezése:** Megjelennek az Atlas Wi-Fi-beállításai, amelyek lehetővé teszik a Wi-Fi hálózat nevének testreszabását routerének megfelelően. Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi SSID (név) és a jelszó megegyezik a Wi-Fi routerével.

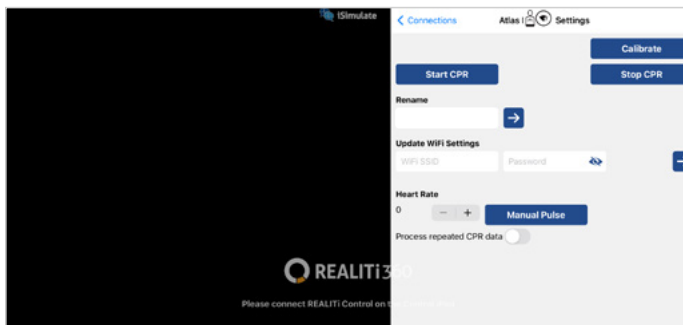

6. A kívánt Wi-Fi SSID és jelszó megadása után kattintson a „Save Settings” elemre hogy a módosításokat sikeresen alkalmazza a Wi-Fi konfigurációban.

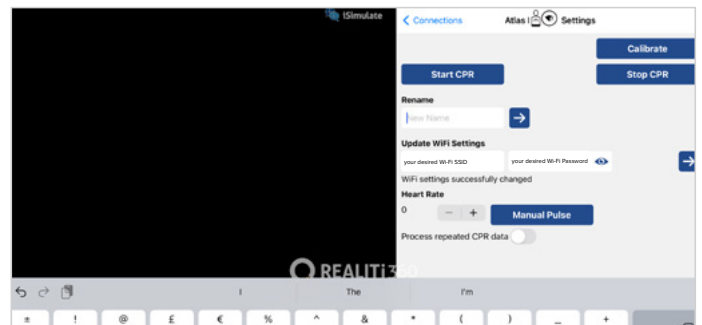


7. Lépjen ki az alkalmazásból: kattintson duplán a kezdőlap gombra, és húzza felfelé az alkalmazás előnézeti kártyáját a bezáráshoz.

8. Kapcsolja ki az Atlas.

9. Csatlakoztassa a Monitor iPadet és a Staging iPadet a router Wi-Fi hálózatához. Mindkét iPadnek ugyanabban a Wi-Fi hálózatban kell lennie.

10. Kövesse az 1. szcenárium 3 - 12. lépését.

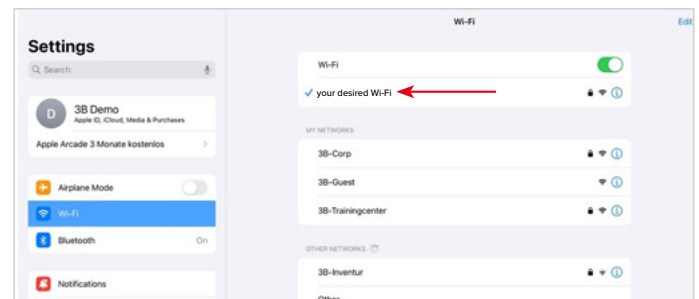

Megjegyzés: Abban az esetben, ha az Atlas készülék Wi-Fi neve és jelszava megváltozott és elfelejtették, kövesse az alábbi lépéseket a visszaállításhoz:

- Kapcsolja ki azt az útválasztót, amelyhez az Atlas korábban nem tudott csatlakozni.
- Kapcsolja be az Atlas szállításhoz mellékelt PIX-Link mini útválasztót, tartalom.
- Kapcsolja be az Atlas készüléket, és győződjön meg róla, hogy legalább 15 percig bekapcsolva marad. Ez az időtartam kritikus az újraindítási folyamat szempontjából. Az Atlas úgy van kialakítva, hogy a szükséges ideig való bekapcsolás után újra csatlakozzon a PIX-Link routerhez, amelyek alapértelmezés szerint az „iSimulate-5.0” nevet adta.
- Miután az Atlas újra kapcsolatot létesített a PIX-Link routerrel, a következők szerint folytathatja a Wi-Fi hálózat nevének és jelszavának frissítését. a 2. forgatókönyv lépései szerint. Lehetősége van visszaállítani az „iSimulate- 5.0”-ra, vagy megváltoztathatja az Ön által választott Wi-Fi névre és jelszóra.

 **Atlas készen áll a kezdésre!**



03/2025



3B Scientific GmbH • Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany • 3bscientific.com

Phone: +49 40 73966-0 • **Fax:** +49 40 73966-100 • **E-mail:** info@3bscientific.com