

# Gyorsindítási Útmutató

Köszönjük, hogy megvásárolta az Atlas Junior – a gyermekgyógyászati ALS szimulátor P76-ot.


Az Atlas Junior és a REALITi 360 összekapcsolása: Egyszerű útmutató

## 1. szcenárium: A meglévő Wi-Fi router neve iSimulate-5.0

1. **Bekapcsolás:** Kezdje az iSimulate-5.0 router bekapcsolásával.
2. **Wi-Fi csatlakozás:** Győződjön meg arról, hogy a REALITi Monitor iPad és a Control iPad is csatlakozik az iSimulate-5.0 hálózathoz.

WiFi neve: iSimulate-5.0



Jelszó: iSimulate2012

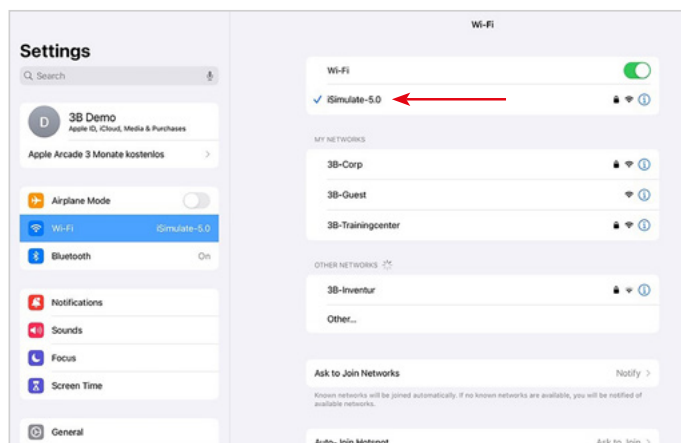



3. **Kapcsolja be az Atlas Juniort:** Keresse meg és nyomja meg a bekapcsoló gombot a tanbábu jobb oldalán, amely automatikusan csatlakozik az iSimulate-5.0 hálózathoz.



4. **Bluetooth beállítások:** Tiltsa le a Bluetooth-t az iPad monitorján, de engedélyezze a Control iPad készüléken, hogy párosítsa az Atlas Junior Bluetooth-ával.

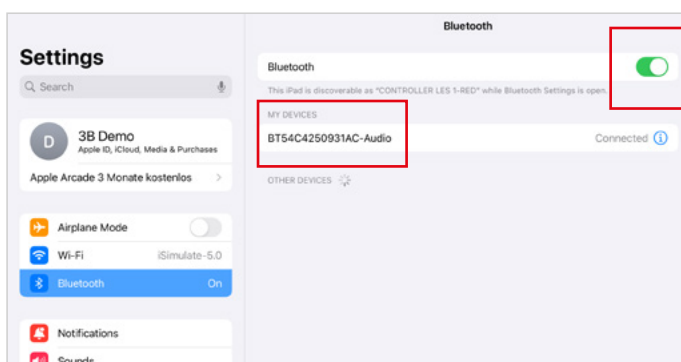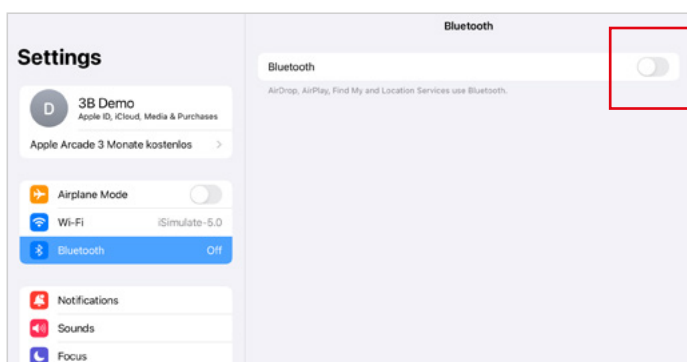


5. **Indítsa el a REALiTi alkalmazást:** Nyissa meg a REALiTi alkalmazást mindkét iPaden, és válassza ki a „Staging” lehetőséget a monitoron és a „Control” elemet a Control iPaden.

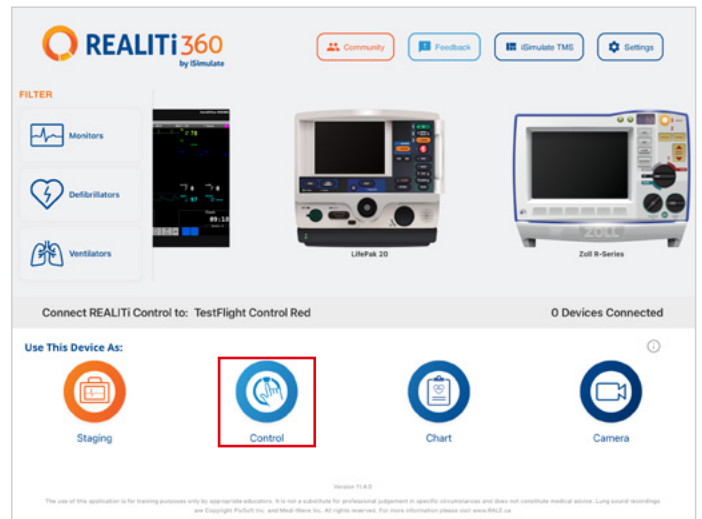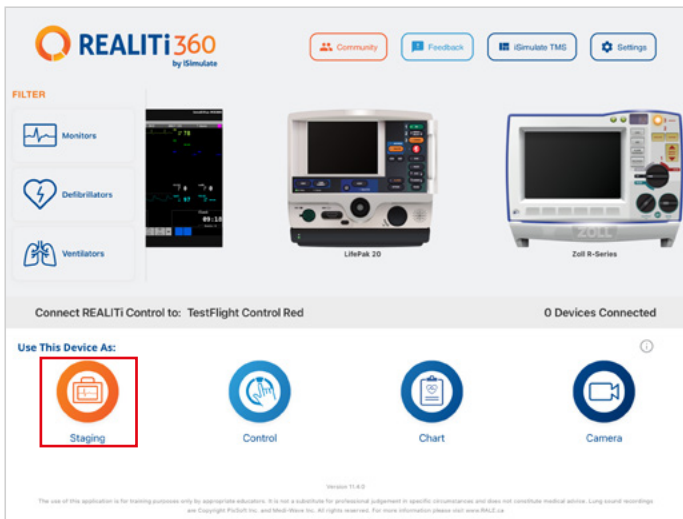


6. **iPad csatlakoztatása:** Mindkét eszköz összekapcsolásához használja a Control iPad „Tap to Connect” funkcióját.


Ha a monitorozó iPad nem jelenik meg a listában, ellenőrizze, hogy a szakaszoló iPad és a monitorozó iPad egyaránt csatlakozik-e a REALiTi router Wi-Fi hálózatához: iSimulate-5.0 (mindkét iPadnek ugyanabban a Wi-Fi hálózatban kell lennie).

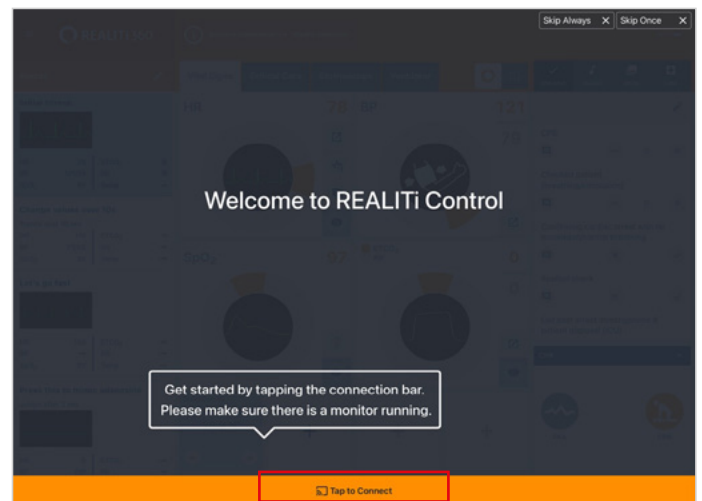

7. **Válasszon ki és indítson el egy szcenáriumot:** Az iPad vezérlőjében válasszon ki egy szcenáriumot vagy monitorbeállítást a kezdéshez.


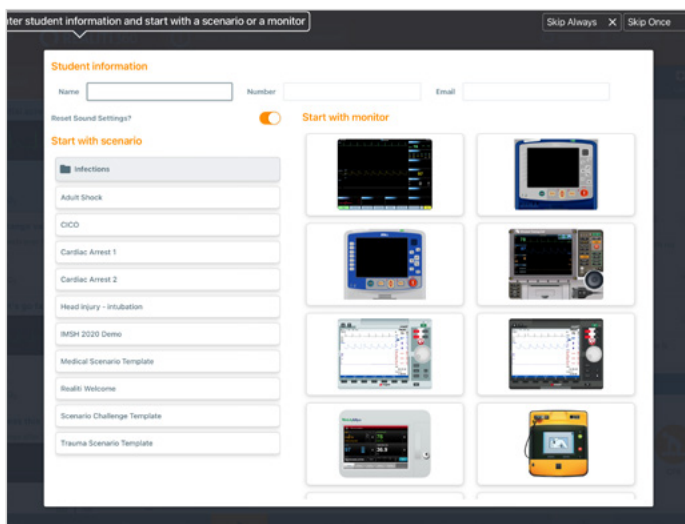


8. **Válasszon ki egy szcenáriumot vagy monitort, és koppintson a „Start” gombra.** Indítsa el a defibrillátort az iPad főmenüjéből:

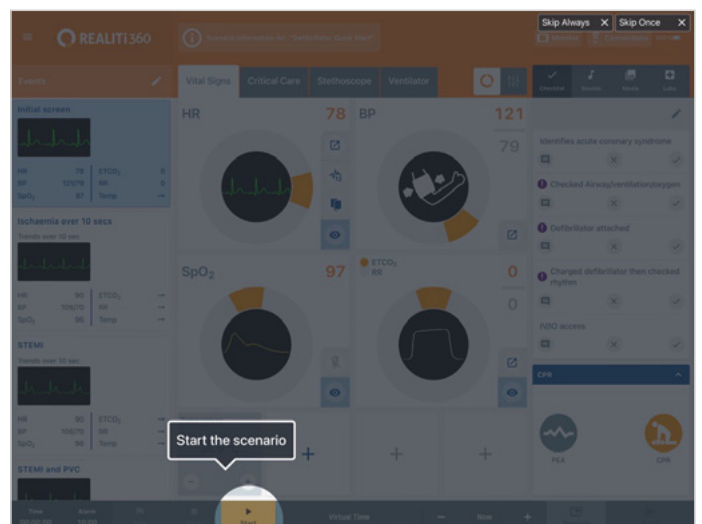


9. Az iPad monitorján meg kell jelennie a 7. lépésben kiválasztott szcenáriumnak vagy monitornak. Indítsa el a defibrillátort.

10. Az Atlas Junior keresése: Csúsztassa befelé az ujját az iPad monitor képernyőjének jobb szélétől az „Available Devices” megjelenítéséhez.

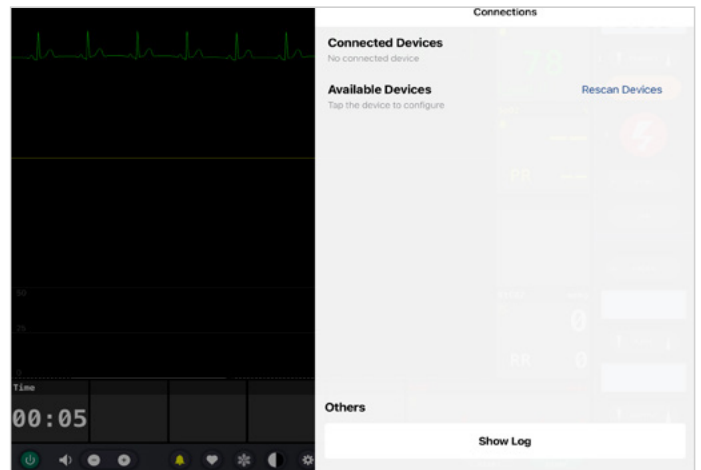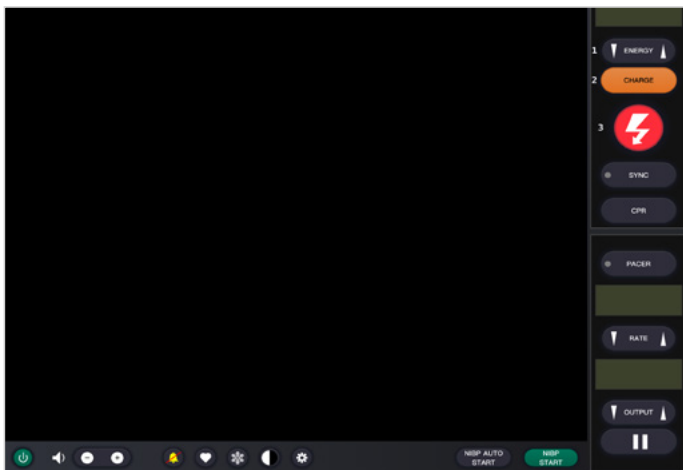

11. Koppintson a „Rescan Devices” lehetőségre. A rendelkezésre álló eszközök közül válassza ki az „Atlas Junior” lehetőséget a „Connect Device” lehetőségre kattintással. A csatlakoztatott Atlas Junior automatikusan kalibrálásra kerül. A tanbábu a carotis pulzust szimulálja.


12. Szimuláció indítása: Nyomja össze a tanbábut. Az EKG hullámformán és a sávdiaagramon látni fogja a CPR-kompressziót.

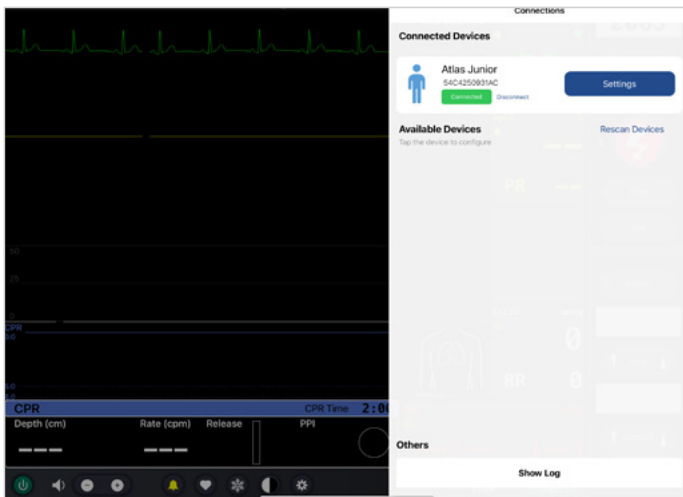


## 2. szcenárium: A meglévő Wi-Fi router neve nem iSimulate-5.0

1. Bluetooth beállítások: Az iPad monitorján kapcsolja be a Bluetooth-t, és csatlakozzon az Atlas Juniorhoz.


2. Indítsa el a REALITI alkalmazást: A monitorozó iPad készüléken indítsa el a REALITI alkalmazást, és válassza a „Staging” gombot:

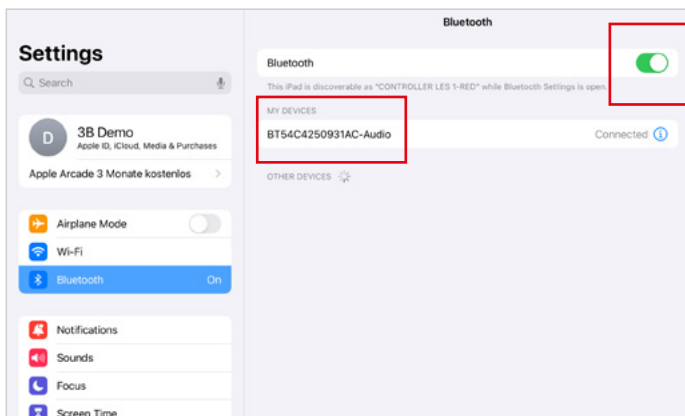


3. **Az Atlas Junior keresése:** húzza befelé az ujját az iPad monitorjának jobb szélétől az „Available Devices” menü megjelenítéséhez. Válassza a „Rescan Devices” lehetőséget, majd válassza az „Atlas Junior Wi-Fi Config” lehetőséget a listából a „Connect Device” lehetőségre kattintással.

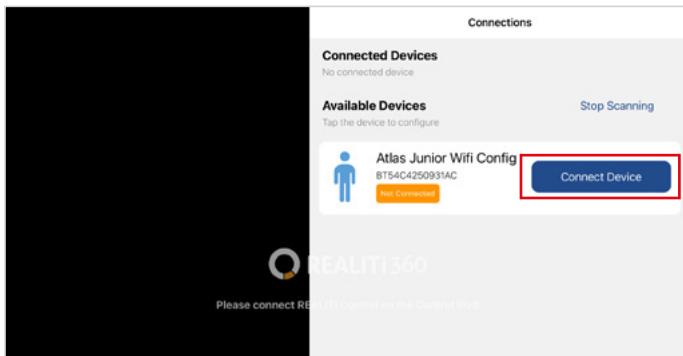


4. Ha sikeresen csatlakozik az „Atlas Junior Wi-Fi Config” opcióhoz, nyissa meg a „Settings” menüpontot.

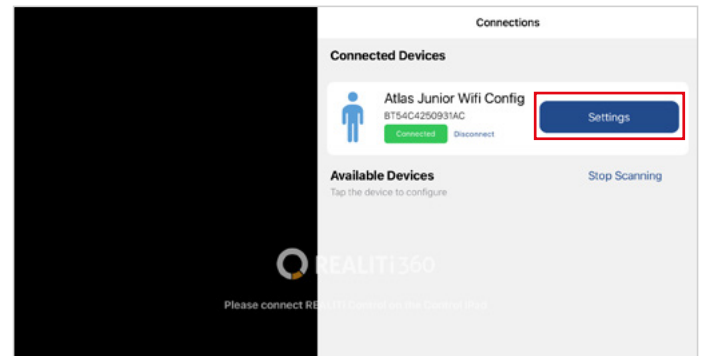

5. **A Wi-Fi SSID átnevezése:** Megjelennek az Atlas Wi-Fi beállításai, amelyek lehetővé teszik a Wi-Fi hálózat nevének testreszabását routerének megfelelően. Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi SSID (név) és a jelszó megegyezik a Wi-Fi routerével.

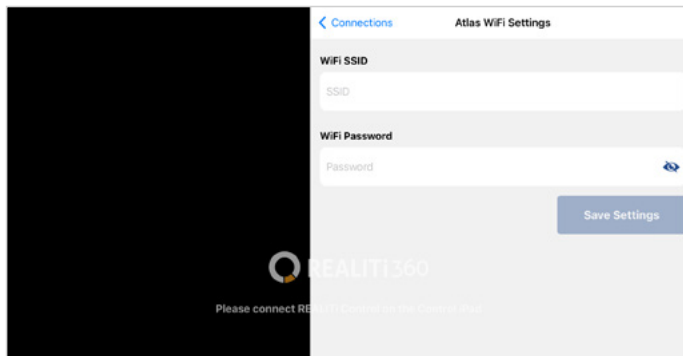

6. A kívánt Wi-Fi SSID és jelszó megadása után kattintson a „Save Settings” elemre hogy a módosításokat sikeresen alkalmazza a Wi-Fi konfigurációban.

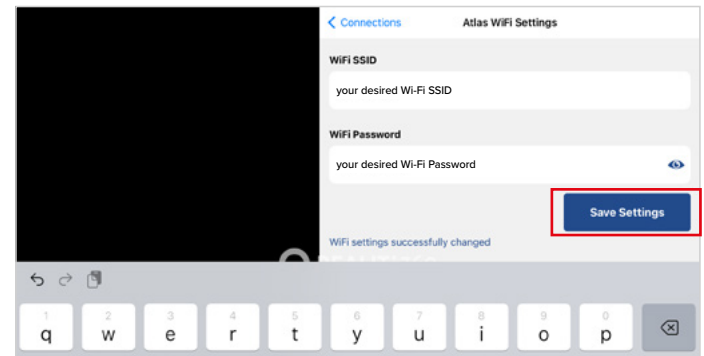


7. Lépjen ki az alkalmazásból: kattintson duplán a kezdőlap gombra, és húzza felfelé az alkalmazás előnézeti kártyáját a bezáráshoz.

8. Kapcsolja ki az Atlas Juniort.

9. Csatlakoztassa a Monitor iPadet és a Staging iPadet a router Wi-Fi hálózatához. Mindkét iPadnek ugyanabban a Wi-Fi hálózatban kell lennie.

10. Kövesse az 1. szcenárium 3 - 12. lépését.

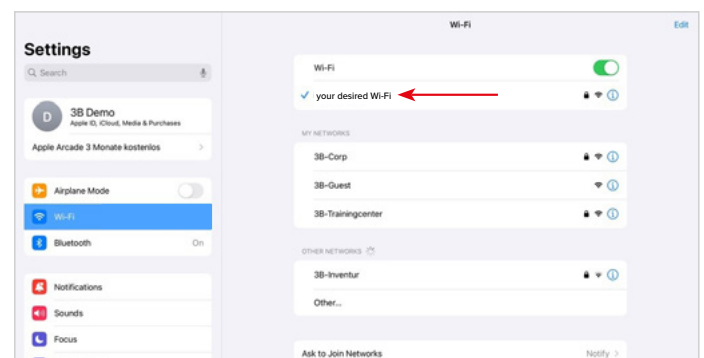

 **Atlas A Junior készen áll a kezdésre!**



03/2025



**3B Scientific GmbH** • Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany • [3bscientific.com](http://3bscientific.com)

**Phone:** +49 40 73966-0 • **Fax:** +49 40 73966-100 • **E-mail:** [info@3bscientific.com](mailto:info@3bscientific.com)