

Краткое руководство


Спасибо за использование Atlas Junior - педиатрический ALS симулятор P76!

Соединение Atlas с Junior REALITY 360: простое руководство

Сценарий 1: Имеющийся у вас Wi-Fi маршрутизатор называется iSimulate-5.0

1. **Включение:** Вначале включите ваш маршрутизатор iSimulate-5.0.
2. **Wi-Fi соединение:** Убедитесь в том, что как монитор iPad, так и контроллер iPad системы REALITi подключены к сети iSimulate-5.0.



Имя Wi-Fi сети: iSimulate-5.0
Пароль: iSimulate2012

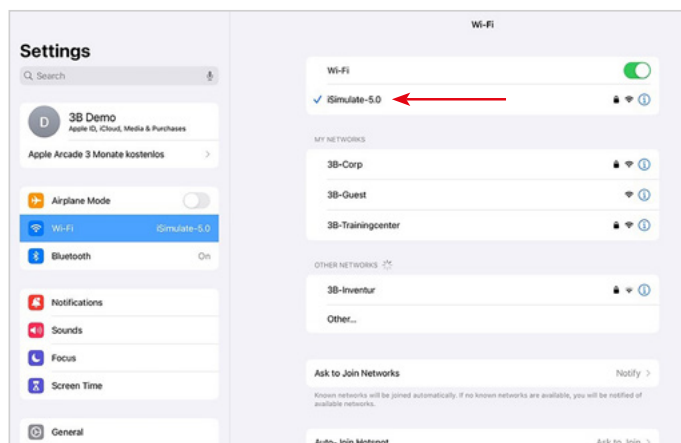



3. **Включите Atlas Junior:** Найдите и нажмите кнопку включения на правой стороне манекена, после чего тренажер автоматически подключится к сети iSimulate-5.0.



4. **Настройки Bluetooth:** Выключите Bluetooth на мониторе iPad, но включите его на контроллере iPad для сопряжения с Bluetooth тренажера Atlas Junior.

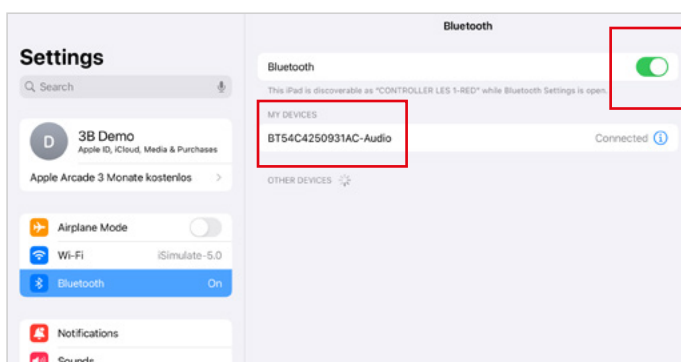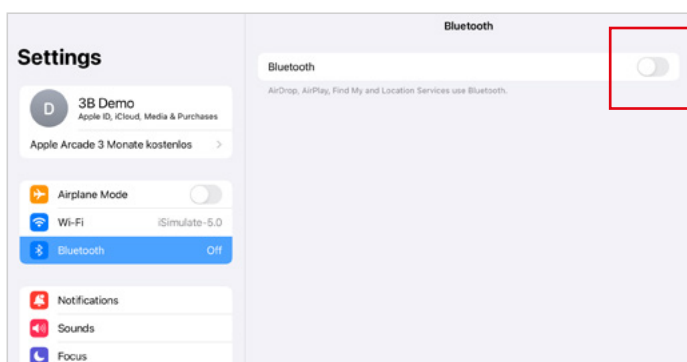


5. **Запустите приложение REALTi:** Откройте приложение REALTi на обоих устройствах iPad, выбрав «Инсценировка» (Staging) на мониторе и «Управление» (Control) на контроллере iPad.

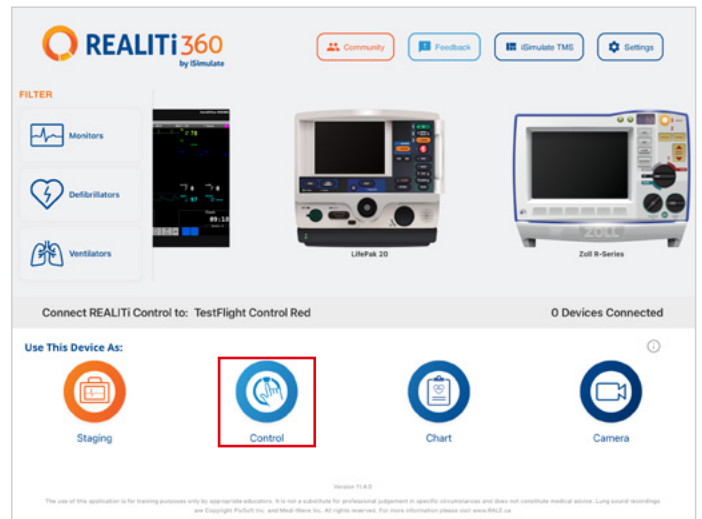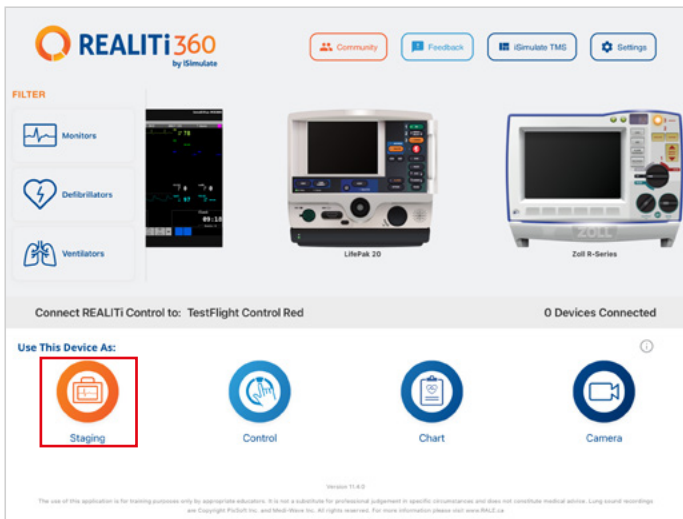


6. **Произведите подсоединение устройств iPad:** Используйте функцию «Коснитесь для подключения» (Tap to Connect) на контроллере iPad для подсоединения обоих устройств.


Если монитор iPad не появился в списке, убедитесь, что и контроллер iPad, и монитор iPad подключены к сети Wi-Fi маршрутизатора REALTi: iSimulate-5.0 (оба устройства iPad должны быть подключены к одной и той же сети Wi-Fi).

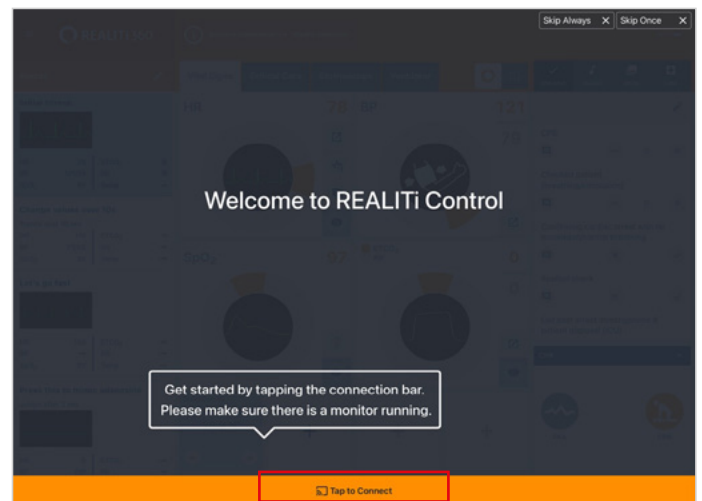


7. **Выберите и запустите какой-либо сценарий:** Вначале выберите на контроллере iPad опцию сценария или монитора.

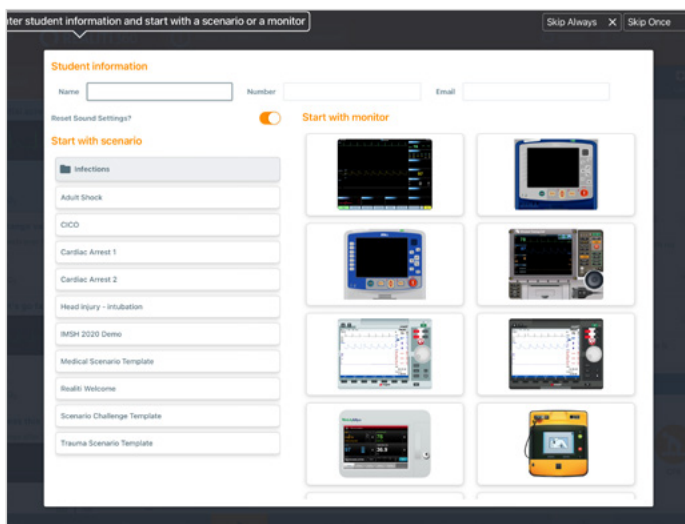


8. **Выберите сценарий или монитор и коснитесь кнопки «Пуск» (Start).** Запустите дефибриллятор из главного меню устройства iPad:

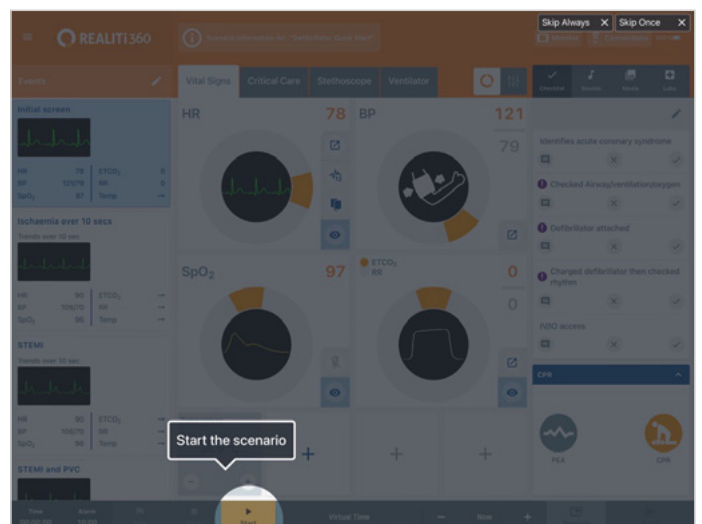


9. На мониторе iPad должен появиться выбранный в ходе шага 7 сценарий или монитор. Запустите дефибриллятор.

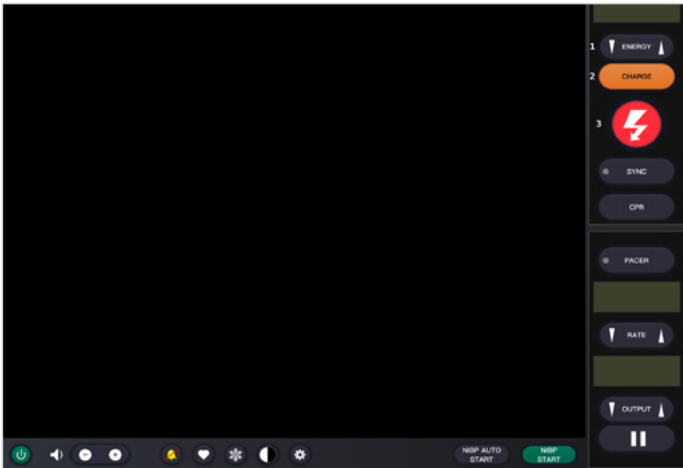

10. Произведите поиск тренажера Atlas Junior: Проведите пальцем с правого края экрана монитора iPad налево для вывода на дисплей списка «Доступные устройства» (Available Devices).

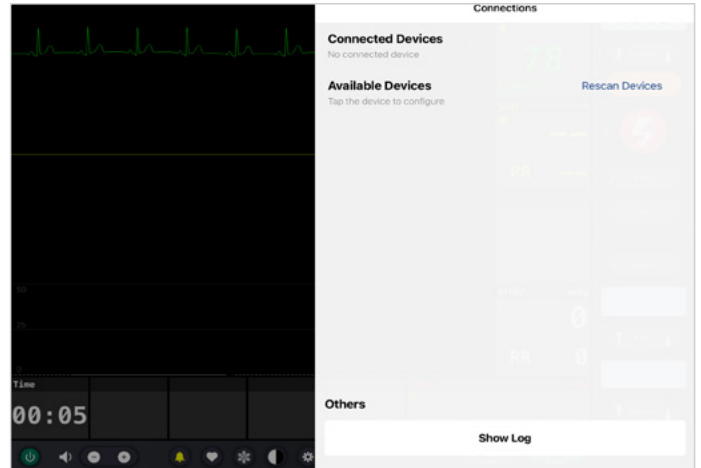

11. Коснитесь «Повторить поиск устройств» (Rescan Devices). В списке доступных устройств выберите Atlas Junior, коснувшись «Подсоединить устройство» (Connect Device). Калибровка подключенного тренажера Atlas Junior будет произведена автоматически. Не манекене произойдет симуляция пульсации сонной артерии.

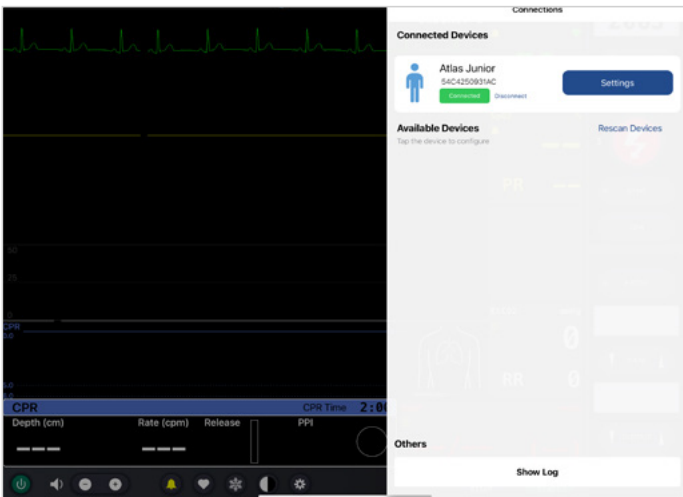


12. Начните симуляцию: Выполните процедуру компрессии на манекене. На осциллограмме ЭКГ и гистограмме должна быть видна компрессия СЛР.



Сценарий 2: Имеющийся у вас Wi-Fi маршрутизатор не называется iSimulate-5.0


1. Настройки Bluetooth: Включите Bluetooth на мониторе iPad и выполните подсоединение к тренажеру Atlas Junior.

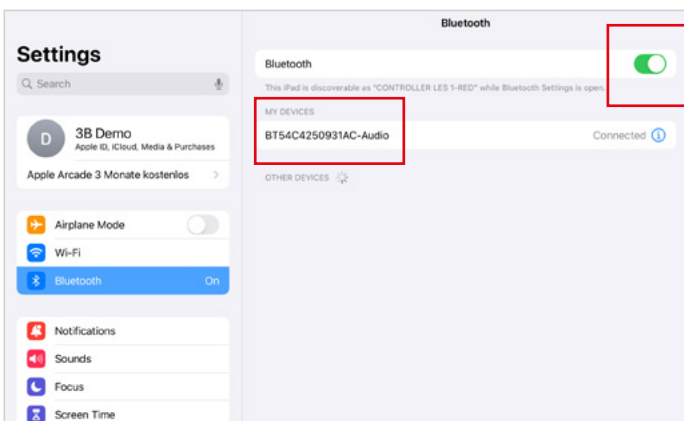


2. Запустите приложение REALTi: На мониторе iPad запустите приложение REALTi и выберите кнопку «Инсценировка» (Staging).




3. **Произведите поиск тренажера Atlas Junior:** проведите пальцем с правого края экрана монитора iPad налево для вывода на дисплей меню «Доступные устройства» (Available Devices). Нажмите «Повторить поиск устройств» (Rescan Devices) и выберите в списке функцию «Настройка Wi-Fi соединения тренажера Atlas Junior» (Atlas Junior Wi-Fi Config), коснувшись «Подсоединить устройство» (Connect Device).

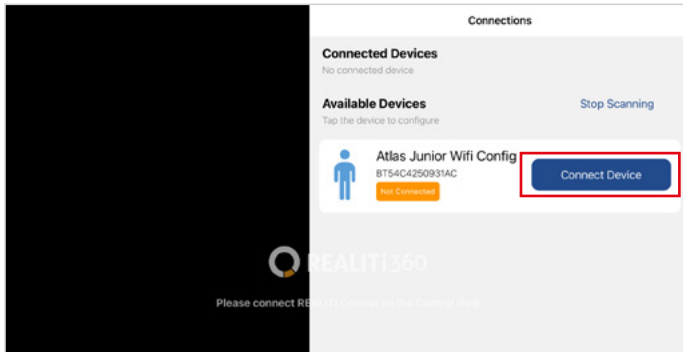


4. После успешного подключения функции «Настройка Wi-Fi соединения тренажера Atlas Junior» (Atlas Junior Wi-Fi Config) войдите в меню «Настройки» (Settings).

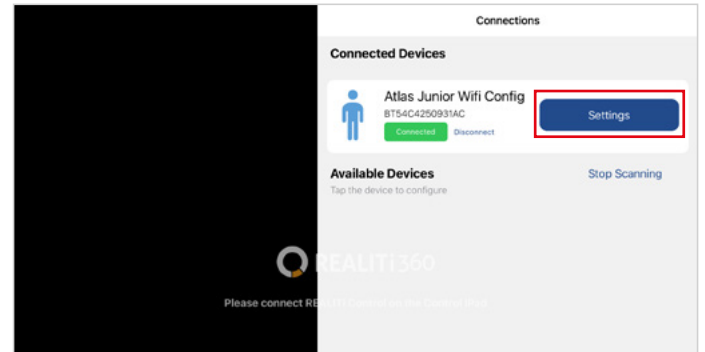

5. **Измените SSID (имя сети) Wi-Fi:** На экран будут выведены настройки Wi-Fi соединения Atlas, что позволит вам задать нужное имя сети Wi-Fi, соответствующее вашему маршрутизатору. Убедитесь, что как SSID (имя сети) Wi-Fi, так и пароль соответствуют вашему маршрутизатору Wi-Fi.

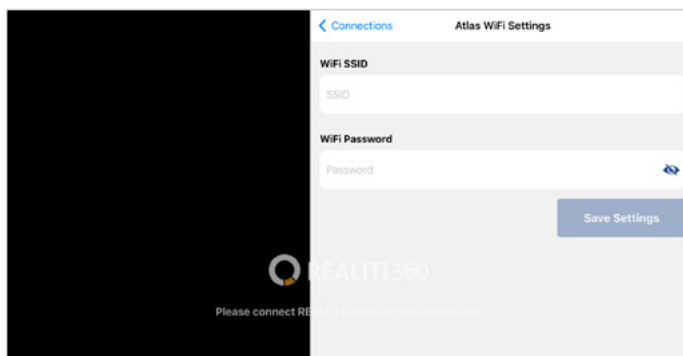

6. После ввода нужных имени сети SSID и пароля Wi-Fi соединения коснитесь «Сохранить настройки» (Save Setting) для применения выполненных изменений к настройке Wi-Fi соединения.

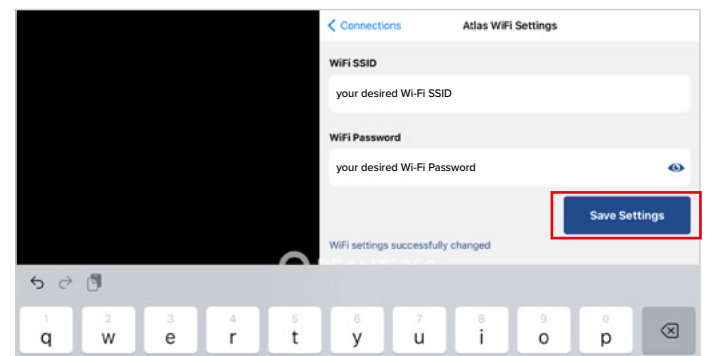


7. Выйдите из приложения, дважды коснувшись кнопки «Главная» (Home), и проведите пальцем вверх по экрану с обзором приложения, чтобы закрыть его.

8. Выключите тренажер Atlas Junior.

9. Подключите монитор iPad и контроллер iPad к сети Wi-Fi вашего маршрутизатора. Оба устройства iPad должны быть подключены к одной и той же сети Wi-Fi.

10. Выполните шаги с 3 по 12 из сценария 1.

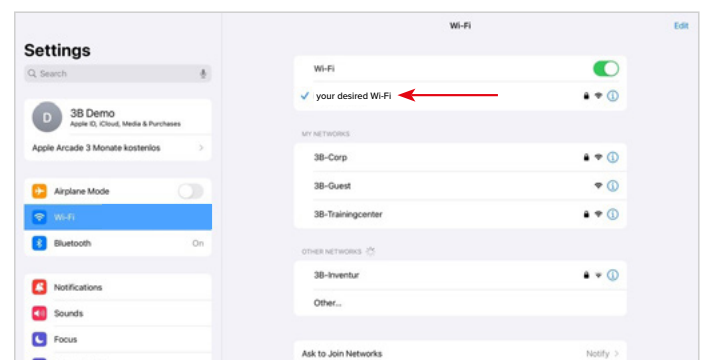

 **Atlas Junior готов к работе!**



03/2025

