





Amputasyon

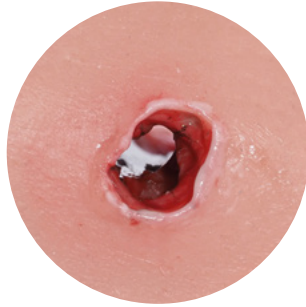

Giriş yarası olan tam ve tam geçişli kurşun yarası (GSW)

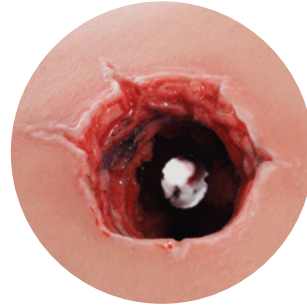

Çıkış yarası olan tam ve tam geçişli kurşun yarası (GSW)



Derin kesik

KANAMA KONTROLÜ EĞİTİMİ BACAĞI MODELİ P103

Yara paketleme ve turnike uygulaması ile kanama kontrolü hakkında eğitim ve pratik yaparak hastane öncesi hasta bakımı eğitimi geliştirin. Bu simülatör, özellikle Taktik Savaş Yaralı Bakımı (TCCC) ve Sivil Yaralı Bakımı eğitimi için uygundur.

3B Scientific'in Kanama Kontrolü Eğitimi Bacak Modeli P103, uyluktaki travmatik yaralanmaların kontrolü ve yönetimi konusunda gerçekçi eğitim sağlamak için uygun fiyatlı ve bir çözümdür. Eğitim alanlar, turnike kullanımı, yara paketleme ve amputasyon yönetim becerileri ile zorlu kanamaları yönetmede güven kazanacaklardır.

Yara çeşitleri:

- Kasık bölgesinde derin kesik
- Üst uylukta tam ve tam geçişli kurşun yarası (GSW)
- Diz bölgesinde amputasyon



Aşağıdaki kanama kontrol prosedürlerinde eğitim verin:

- Ekstremitte turnike uygulaması
- Bağlantı yarası yönetimi dahil yara paketleme
- XSTAT® (hemostatik cihaz) uygulaması
- Stump / Geniş alan yara pansumanı



Bacakta Kanama Kontrolü için P103 eğitmeninin teknik özellikleri:

- Eğitmen, diz bölgesinde amputasyon olan bir yetişkin erkeğin bacağına gerçekçi dış anatomi ile simüle eder
- Cilt, insan cildi ve doku hissiyatını simüle etmek için yüksek kaliteli SKINlike™ dayanıklı silikondan yapılmıştır
- Palpe edilebilen hasarlı damar özellikleri
- **Doğrudan geri bildirim: turnike doğru şekilde uygulandığında (yerleştirme ve kapatma) kanama durur (kan damarlarının mekanik tıkanması)**
- Turnike uygulaması «yüksek ve sık» veya yara üzerinde 5 - 8 cm (2" - 3") yukarıda yapılabilir
- Her yara modüler yaralanma senaryoları sunmak için özel bir örtü ile gizlenebilir
- **Her yara bağımsız olarak kanayabilir**
- Saha kullanımı için tasarlanmıştır: dayanıklı yapı, pil veya harici güç gerektirmez
- Temizlemesi kolaydır ve taşıma çantasında (dahil) taşınması kolaydır

Kanama sistemi:

- Venöz veya arteriyel nabız kanaması simüle eden manuel kan pompası sistemi ile güvenli kan rezervuarı (2 litre)
- Yara paketlemesi sırasında kanın rezervuara geri akışı olmaz, böylece simülasyon kesintisiz olur

Teslimat içeriği:

- Açık veya koyu ten rengine sahip 3 farklı travmatik yara içeren travma bacağı
- 2 yara örtüsü
- Manuel kan pompası sistemi
- Taşıma çantası
- Kum torbası
- 2 litre kan rezervuarı
- Kan tozu (100 gram)



- 1023106 Kanama Kontrolü Eğitimi Bacak Modeli P103 – açık ten rengi
- 1023314 Kanama Kontrolü Eğitimi Bacak Modeli P103D – koyu ten rengi
- 1023954 Kan tozu
- 1024091 Kan tozu (10'lu set)

07/2024



DAHA FAZLA BILGIYE ŞU ADRESTEN ULAŞABİLİRSİNİZ 3BSCIENTIFIC.COM



3B Scientific TR • Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. 10Y Blok No:105 34235 • Tekstilkent (B13 Blok No:36)
Esenler • İstanbul • Türkiye • 3bscientific.com • Phone: + 90 (0)212-422-8800 • Faks: + 90 (0)212-422-8801