



Amputáció

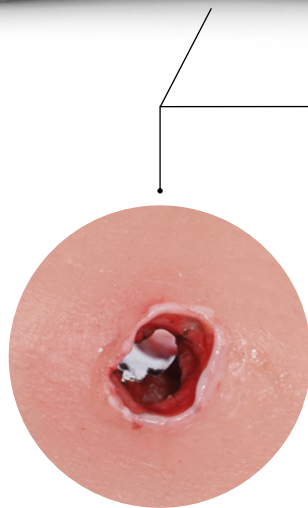

Átmenő lött seb bemeneti nyílás

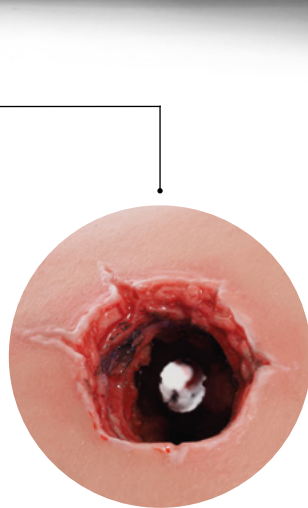

Átmenő lött seb kimeneti nyílás



Mély vágás

VÉRZÉSCSILLAPÍTÁSI OKTATÓ LÁB P103

Fejlessze a kórházon kívüli betegellátás képzetét oktatási és gyakorlati tréningekkel a vérzéscsillapítás, a sebkötözés és az érszorító alkalmazásának területén. Ez a szimulátor különösen alkalmas a taktikai harci sebesült ellátás (TCCC) és a polgári sebesült ellátás képzésére.

A 3B Scientific által kifejlesztett P103 Vérzéscsillapítási Oktató Láb megfizethető és egyszerű megoldást kínál a vérzéscsillapítás és a traumás sérülések kezelésének valóságghű gyakorlására a combon. A résztvevők magabiztosságot szereznek a nehéz vérzések kezelésében érszorítók, sebpakolás és amputációs eljárások alkalmazásával.

Sebminták:

- Mély vágás az ágyéki területen
- Átmenő lött seb a comb felső részén
- Amputáció a térd régiójában



A következő vérzéscsillapítási eljárások gyakorlása:

- Végtagi érszorító alkalmazása
- Sebpakolás, beleértve a funkcionális sebek kezelését
- XSTAT® (vérzéscsillapító eszköz) alkalmazása
- Csonk / Nagy felületű seb kötözése



A P103 vérzéscsillapító oktató láb technikai jellemzői:


- Az oktatási eszköz egy felnőtt férfi lábát szimulálja amputációval a térd régiójában, mely élethű külső anatómiával rendelkezik
- A bőr kiváló minőségű SKINlike™ tartós szilikonból készült, annak érdekében, hogy szimulálja az emberi bőr és szövetek tapintását
- Kitapintható sérült ér
- **Közvetlen visszajelzés: a vérzés eláll (vérerek mechanikus elzárása), amint az érszorító megfelelően felhelyezésre kerül (felhelyezés és zárás)**
- Az érszorító felhelyezhető „magasan és szorosan” vagy 5-8 cm-rel a seb fölött
- Minden egyes seb lefedhető egy erre kijelölt takaróval, lehetőséget kínálva a moduláris sérülések megjelenítésére
- **Minden seb önállóan vérezhet**
- Terepen történő használatra tervezve: tartós szerkezet, nincs szükség elemre vagy külső áramforrásra
- Könnyen tisztítható és szállítható a hordtáskában (tartozék)

Vérzési rendszer:

- Biztonságos vértartály (2 liter) kézi vérpumparendszerrel, amely vénás vagy artériás pulzáló vérzést szimulál
- Nincs vérvisszafolyás a környezetébe a sebkötözés során, így a szimuláció zavartalan lesz

Szállítási tartalom:

- Trauma láb 3 különböző traumás sebbel, világos vagy sötét bőrrel
- 2 db sebfedő
- Kézi vérpumparendszer
- Hordtáska
- Homokzsák
- 2 literes vértartály
- Vérpor (100 gramm)

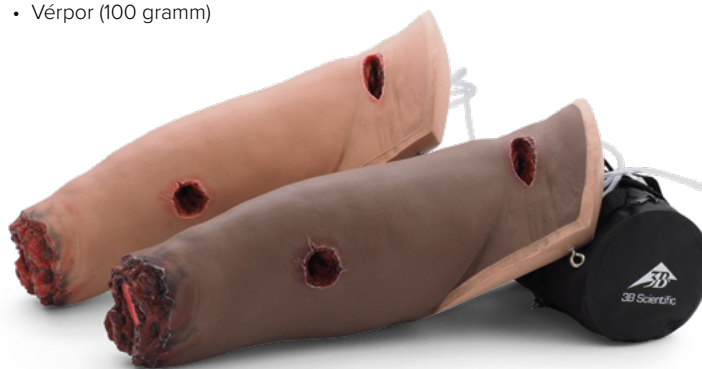

1023106 Vérzéscsillapítási oktató láb P103 – világos bőr

1023314 Vérzéscsillapítási oktató láb P103D – sötét bőr

1023954 Vérpor

1024091 Vérpor (10 darabos szett)



TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ONLINE ELÉRHETŐ A KÖVETKEZŐ CÍMEN 3BSCIENTIFIC.COM



3B Scientific Europe Kft. • Tanszolgáltató és Forgalmazó Kft • Kozma u. 9-11 • H-1108 Budapest
Hungary • Phone: +36 1 431 09 14 • Fax: +36 1 262 33 93 • E-Mail: eu3bs@3bscientific.com