



ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОСТАНОВКИ ПРК P97 PRO

Разработанный в сотрудничестве с ведущими акушерами Германии, обновленный вариант тренажера для остановки послеродового кровотечения (ПРК) P97 PRO представляет собой идеальное решение для отработки методов ранней диагностики, системной оценки и остановки ПРК в приближенных к реальности условиях. Сильное кровотечение после родов при отсутствии своевременной диагностики и принятия надлежащих мер для его остановки может привести к смерти роженицы в течение нескольких часов. Тренажер для остановки ПРК P97 PRO от компании 3B Scientific помогает акушерскому и медицинскому персоналу отрабатывать навыки выполнения процедур, позволяющих эффективно выявлять и останавливать послеродовое кровотечение.


С помощью тренажера P97 PRO можно производить оценку и устранение трех основных причин послеродового кровотечения: Атония матки, травмы и задержка плацентарной ткани. Различные уровни тонуса матки легко регулируются. На данном тренажере для остановки ПРК можно также отрабатывать навыки зашивания разрывов влагалища; входящие в комплект поставки вставки с разрывами являются взаимозаменяемыми. Плацента изготовлена из силикона, придающего ей реалистичные мягкость и тактильные ощущения. Задержавшиеся после родов остатки плаценты можно вручную удалить из полости матки, что позволяет отрабатывать навыки необходимых для этой цели медицинских процедур. Благодаря резервуару для крови емкостью 3000 мл и компактной системе трубок можно имитировать сценарии наиболее тяжелых случаев ПРК.



- Кровопотеря до 3000 мл
- Регулируемая скорость потока крови до 400 мл/мин
- Возможность имитации нескольких источников кровотечения

Высококачественный силикон SKINlike™

Позволяет осуществлять реалистичную пальпацию вагинального канала, начиная от брюшной стенки и до матки

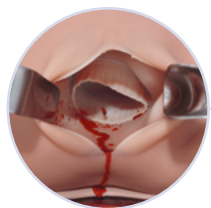


Кровотечение из шейки матки

Реалистичский муляж шейки матки в состоянии после родов



Вагинальное кровотечение

Подлежащие зашиванию разрывы влагалища

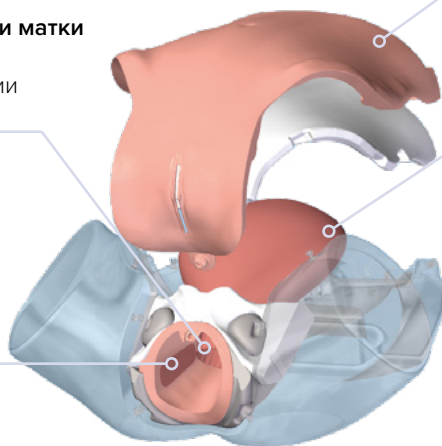

Маточное кровотечение

Регулируемый тонус матки



Удаление задержавшихся остатков плаценты



Тренажер для остановки ПРК P97 Pro является идеальным инструментом для отработки выполнения, как индивидуально, так и в составе медицинской бригады, следующих процедур:

- Диагностика атонии матки путем абдоминального обследования
- Выполнение массажа дна матки и бимануальной компрессии матки
- Зашивание разрывов влагалища
- Визуальное исследование шейки матки под углом 360 градусов
- Ручное удаление остатка плаценты
- Внутриматочная баллонная тампонада, например, с помощью баллона Bakri®
- Наложение бинтов на внутриматочные раны
- Презентация ситуаций сильного послеродового кровотечения
- Оценка кровопотери
- Катетеризация мочевого пузыря (без жидкостей)
- Демонстрация наложения компрессионных швов на матку

1023727 Тренажер для остановки ПРК P97 PRO

Комплект поставки:

- Тренажер для остановки ПРК P97 Pro
- Резервуар для крови емкостью 3000 мл
- Соединители трубок с цветовым кодом
- Плацента с тремя остаточными фрагментами
- Две матки из пеноматериала
- Порошок имитатор крови (100 г)
- Лубрикант
- Комплект запчастей (1 вставка с разрывами, 1 комплект остатков плаценты)
- Штатив для сушки муляжа матки после очистки
- Сумка для переноски



Возможна также поставка в качестве дополнительного модуля для тренажера по отработке навыков родовспоможения P90:

1023731 Дополнительный модуль для остановки ПРК

1022879 3В Тренажер по отработке навыков родовспоможения P90 PRO

1022878 3В Тренажер по отработке навыков родовспоможения P90 BASIC

06/2023

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВАШЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМПАНИИ 3B SCIENTIFIC



ООО «3Б Сайнтифик» • 196084, Россия, Санкт-Петербург, Московский пр., 79А, лит. А, офис 400
3bscientific.com • Тел.: +7 812 3242223 • sales.spb@3bscientific.com

