



NOUVEAU

P22 SUTURE SKIN TRAINER


Le bloc de pratique de sutures cutanées en silicone de 3B Scientific reproduit parfaitement la structure anatomique des couches de peau humaine – épiderme, derme et hypoderme – afin d’offrir à l’apprenant une expérience de ressenti tactile fidèle à la réalité. Notre objectif est d’aider les apprenants à acquérir les bonnes techniques de suture à travers un entraînement pratique continu.

L'intégration d'un filet de tissu, à la fois horizontalement et verticalement, dans les couches de la simili-peau en silicone améliore la durabilité et la résistance à la déchirure, et garantit la cohésion du bloc de simili-peau pendant l'entraînement à la suture. En utilisant le socle exclusif fourni, les utilisateurs ont la possibilité d'appliquer une tension cutanée au bloc de suture qui renforce le réalisme. Cette tension reproduit l'alignement des fibres de collagène sous-jacentes. Le bloc de simili-peau permet aux utilisateurs de réaliser des incisions de profondeur et d'emplacement variables à l'aide d'un scalpel aiguisé. Chaque incision peut être suturée à plusieurs reprises – jusqu'à ce qu'une zone spécifique du bloc devienne trop perforée pour supporter d'autres sutures.




Compétences clés :

- Suture en surjet intradermique
- Suture à points séparés simples
- Suture en surjet
- Suture en surjet intracutané
- Suture par agrafes
- Suture de plastie en Z

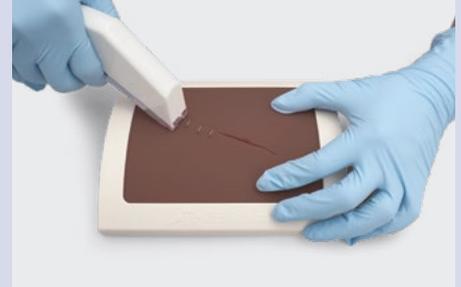


Contenu du colis à la livraison :

- Bloc de suture (x2)
- Socle pour bloc de suture

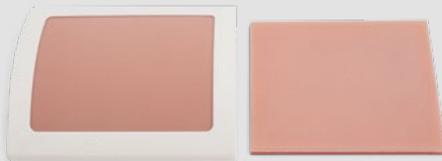

Kit de pratique des sutures cutanées, peau claire | 1024494

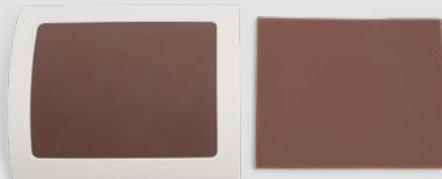

Kit de pratique des sutures cutanées, peau foncée | 1024495

Pièces de rechange :



Bloc de suture de rechange
Peau claire x10 | 1024496



Bloc de suture de rechange
Peau foncée x10 | 1024497

Également disponibles :

Bras de pratique des sutures,
peau claire | 1020904 | P101

Bras de pratique des sutures,
peau foncée | 1023312 | P101D



01/2024



DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SONT DISPONIBLES
EN LIGNE À L'ADRESSE 3BSCIENTIFIC.COM



France 3B Scientific S.A.R.L. • 8, Rue Jean Monnet, Z.I. Parc 3 • 68870 Bartenheim • France

Phone: +33 3 89 70 75 20 • Fax: +33 3 89 70 75 21 • E-mail: commande@3bscientific.com • 3bscientific.com