



NOVO

P22 TREINADOR DE SUTURA NA PELE


A almofada de sutura de silicone da 3B Scientific replica com perfeição a estrutura anatômica das camadas da pele humana, incluindo a epiderme, derme e hipoderme, para criar uma experiência tátil realista ao toque do usuário. Nosso objetivo é assistir os alunos na aquisição da técnica correta de sutura por meio de treinamento contínuo.

A integração de uma rede de tecido, tanto horizontal, quanto verticalmente, dentro das camadas de pele de silicone aumenta a durabilidade e a resistência ao rasgamento, garantindo que a almofada de pele permaneça intacta durante o treinamento de sutura. Usando a base exclusiva fornecida, os usuários podem aplicar tensão à almofada de suturas, resultando em uma experiência de sutura mais realista. Esta tensão replica o alinhamento das fibras de colágeno subjacentes. A almofada de pele permite que os usuários façam incisões de profundidade e localização variáveis com bisturi afiado. Cada incisão pode ser repetidamente suturada até que uma área específica na almofada fique perfurada demais para suportar mais suturas.




Habilidades Fundamentais:

- Sutura subdermal
- Sutura simples interrompida
- Sutura contínua
- Sutura intracutânea
- Grampeamento de sutura
- Sutura de zetaplastia

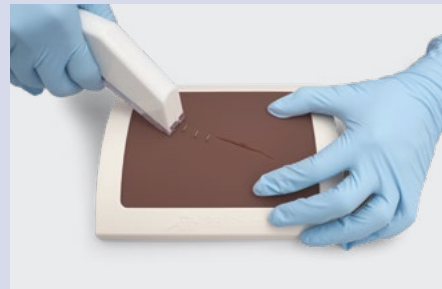

Conteúdo do fornecimento:

- Almofada de sutura (x2)
- Base para almofada de sutura

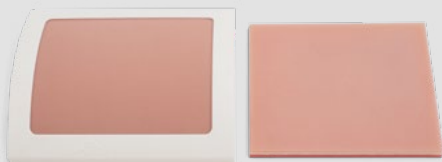

Conjunto de Pele de Sutura Clara | 1024494




Conjunto de Pele de Sutura Escura | 1024495

Peças de reposição:



Substituição da Almofada de Sutura
10x clara | 1024496

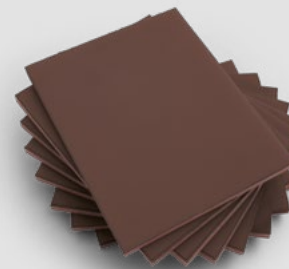

Substituição da Almofada de Sutura
10x escura | 1024497

Também disponíveis:

Braço de Prática de Sutura claro
1020904 | P101

Braço de Prática de Sutura escuro
1023312 | P101D



01/2024



MAIS INFORMAÇÕES ONLINE NO SITE 3BSCIENTIFIC.COM



Brasil 3B Scientific Imp. E Exp. Ltda. • Rua Landmann, 92 B • Costa e Silva • CEP 89217-420 Joinville - SC • Brasil
Fone: +55 (0) 47 3464-1818 • E-mail: vendas@3bscientific.com • 3bscientific.com