



QUICKLUNG BREATHER:



SIMULACIÓN. FORMACIÓN. EXCELENCIA. GARANTIZAMOS LA EXCELENCIA EN ASISTENCIA RESPIRATORIA

QuickLung Breather es una herramienta innovadora diseñada para simular con realismo la mecánica respiratoria que resulta imprescindible para los profesionales sanitarios. El dispositivo **simula la respiración espontánea** para que los profesionales de la medicina, los docentes de respiración y los facultativos especialistas en pulmón o cuidados críticos mejoren sus habilidades con modos de respirador avanzados que garantizan un elevado nivel de atención y seguridad en tratamiento respiratorio. QuickLung Breather ofrece un realismo sin precedentes con valores de resistencia y distensibilidad ajustables, imitando diversas afecciones pulmonares y patrones respiratorios para facilitar una formación completa.

+

PRESTACIONES FORMATIVAS Y DE SIMULACIÓN

- Valores ajustables: resistencia, distensibilidad, frecuencia respiratoria y volumen corriente
- Imita el funcionamiento de los pulmones humanos y simula diversos patrones respiratorios
- Admite modos de respirador avanzados con énfasis en la activación de respirador

+

INTERACCIÓN CON EL USUARIO Y RETROINFORMACIÓN

- La respuesta en tiempo real mejora las habilidades
- Fácil configuración y compatibilidad con cualquier respirador
- Funciona con una toma estándar para simplificar el uso

+

DURADERO Y RENTABLE

- Fabricado con materiales de calidad para resistir la formación intensiva
- Proporciona activación de respirador fiable a un coste asequible
- Portátil y fácil de usar, ideal para UCI y transporte

Selección entre 3 valores de resistencia.

Fácil configuración: basta conectar el respirador y seleccionar los valores.

El brazo de elevación abre los fuelles de QuickLung para simular respiraciones espontáneas.

Selección de parámetros (frecuencia respiratoria, volumen, relación I:E) para personalizar escenarios de paciente.


Simulación pediátrica mediante cargas de adulto con valores de distensibilidad variables.

Volúmenes corrientes desde pacientes pediátricos hasta adultos.

Rápida creación de escenarios de paciente a partir de cinco patrones respiratorios: eupnea, Cheyne-Stokes, Biot, Kussmaul y apneusis.


¿Ya tiene QuickLung?

Actualice su QuickLung con QuickLung Breather para simular respiraciones espontáneas.

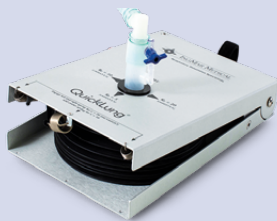


Quick Lung | 1025188*

+

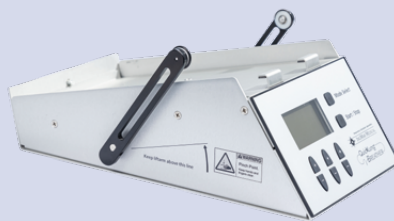

Opción QuickLung Breather | 1025207

=

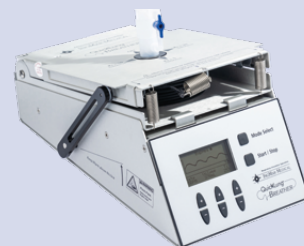

QuickLung Breather | 1025192*

* También disponible en versión pediátrica

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE QUICKLUNG BREATHER



España 3B Scientific, S.L. • C/ Ronda Narciso Monturiol 3 • Edif. ABM, Torre A, Despacho 8
46980 Paterna (Valencia) • España • 3bscientific.com
Phone: 96 131 84 38 • Fax: 96 136 64 07 • E-mail: e3bs@3bscientific.com