



QUICKLUNG BREATHER:



SIMULARE. ADDESTRARE. ECCELLERE. GARANTIRE L'ECCELLENZA NELL'ASSISTENZA RESPIRATORIA

QuickLung Breather è uno strumento innovativo ed essenziale per gli operatori sanitari, progettato per simulare meccaniche respiratorie realistiche. Il dispositivo **simula la respirazione spontanea**, consentendo a professionisti del settore medico, educatori della salute respiratoria, pneumologi o medici di terapia intensiva di migliorare le competenze con modalità di ventilazione avanzate, garantendo elevati standard di cura e sicurezza nella gestione respiratoria. QuickLung Breather offre un realismo senza pari grazie alle impostazioni di resistenza e compliance regolabili, imitando varie condizioni polmonari e modelli di respirazione per una formazione completa.

+

CAPACITÀ DI SIMULAZIONE E ADDESTRAMENTO

- Impostazioni regolabili: resistenza, compliance, frequenza respiratoria e volume corrente
- Imita il comportamento dei polmoni umani e simula vari modelli di respirazione
- Supporta modalità di ventilazione avanzate, con particolare attenzione all'attivazione del ventilatore

+

INTERAZIONI E FEEDBACK DEGLI UTENTI

- Il feedback in tempo reale migliora le competenze
- Facile da configurare e compatibile con qualsiasi ventilatore
- Funziona con una presa di corrente standard per un utilizzo senza problemi

+

DURATA ED EFFICIENZA DEI COSTI


- Costruito con materiali di qualità per resistere a un addestramento rigoroso
- Fornisce un'attivazione accurata del ventilatore a un costo accessibile
- Portatile e facile da usare, ideale per l'unità di terapia intensiva e il trasporto

Alterna tra 3 impostazioni di resistenza.

Facile da configurare: è sufficiente collegare il ventilatore e selezionare le impostazioni.

Il braccio di sollevamento apre i soffietti QuickLung per simulare i respiri spontanei.

Seleziona i parametri (frequenza respiratoria, volume, rapporto I:E) per personalizzare lo scenario del paziente.

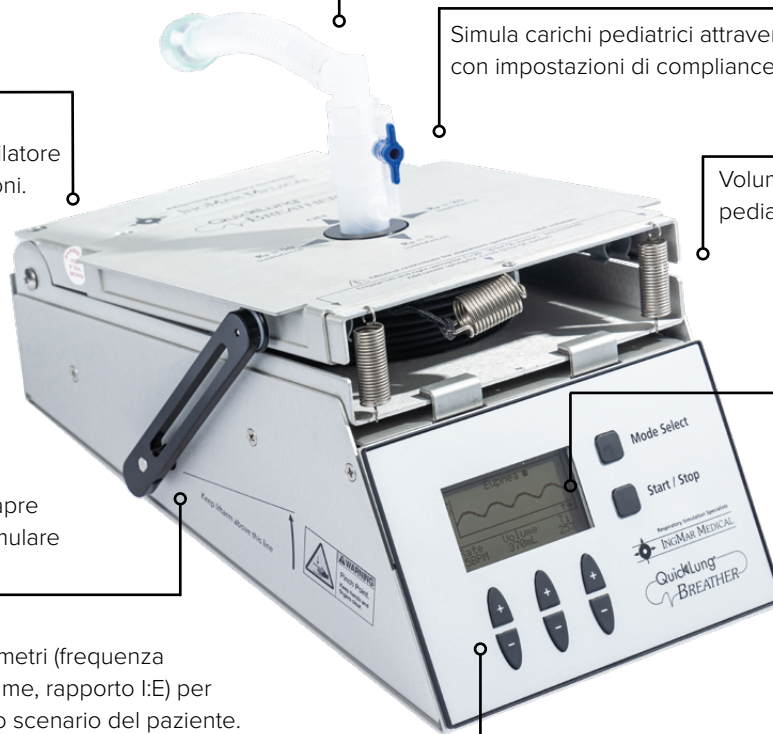


Simula carichi pediatrici attraverso carichi adulti con impostazioni di compliance variabile.

Volumi correnti da piccoli pazienti pediatrici ad adulti.

Crea rapidamente scenari per i pazienti selezionando tra cinque modelli di respirazione: Eupnea, Cheyne-Stokes, Biot, Kussmaul e Apneusi.


Possiedi già QuickLung?

Aggiorna il tuo QuickLung con QuickLung Breather per simulare un'esperienza di respirazione spontanea.

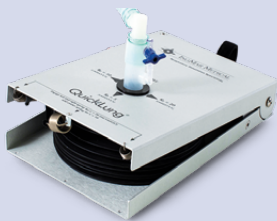


Quick Lung | 1025188*

+

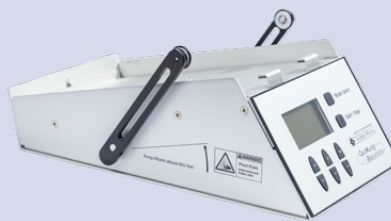

Opzione QuickLung Breather | 1025207

=

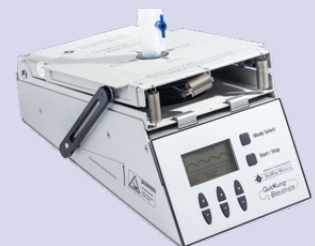

QuickLung Breather | 1025192*

* Disponibile anche in versione pediatrica

PER SAPERNE DI PIÙ SU QUICKLUNG BREATHER, SCANSIONARE IL CODICE QR



Italia **3B Scientific S.r.l.** • Via Progresso, 46 • 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) • Italia • 3bscientific.com
 Tel.: +39 051 79 05 05 • Fax: +39 051 469 50 98 • E-mail: vendite.italia@3bscientific.com