



## QUICKLUNG BREATHER:



SİMÜLASYON. EĞİTİM. ÜSTÜN BAŞARI. SOLUNUM DESTEĞİNDE MÜKEMMELLİĞİN SAĞLANMASI

**QuickLung Breather** gerçekçi solunum mekaniklerini simüle etmek için tasarlanmış, sağlık uzmanları için yenilikçi ve önemli bir araçtır. Cihaz **spontan solunumu simüle ederek** tıp uzmanlarının, solunum eğitimcilerinin, pulmoner veya kritik bakım doktorlarının solunum yönetiminde yüksek standartta bakım ve güvenlik sağlayan gelişmiş ventilatör modlarıyla becerilerini geliştirmelerine olanak tanır. QuickLung Breather, değiştirilebilir direnç ve uyumluluk ayarları ile kapsamlı eğitim için çeşitli akciğer koşullarını ve solunum modellerini taklit ederek benzersiz bir gerçekçilik sunar.

+

### SİMÜLASYON VE EĞİTİM OLANAKLARI

- Değiştirilebilir Ayarlar: direnç, uyumluluk, solunum hızı ve tidal volüm
- İnsan akciğer davranışlarını taklit eder ve çeşitli solunum paternlerini simüle eder
- Ventilatör tetiklemeye odaklanarak gelişmiş ventilatör modlarını destekler

+

### KULLANICI ETKİLEŞİMLERİ VE GERİ BİLDİRİM

- Gerçek zamanlı geri bildirim becerileri geliştirir
- Kolay kurulum ve herhangi bir ventilatör ile uyumluluk
- Standart bir prizde çalışarak sorunsuz kullanım sağlar

+

### DAYANIKLILIK VE UYGUN MALİYET


- Yoğun eğitimlere dayanacak şekilde kaliteli malzemelerle üretilmiştir
- Uygun maliyetle doğru ventilatör tetikleme sağlar
- Taşınabilir ve kullanımı kolaydır, yoğun bakım ünitesinden hasta nakline kadar idealdir

3 direnç ayarı arasında geçiş yapın.

Kolay kurulum - sadece ventilatörünüzü bağlayın ve ayarları seçin.

Liftarm, spontan nefesleri simüle etmek için QuickLung körüklerini açar.

Hasta senaryosunu özelleştirmek için parametreleri (Nefes hızı, hacim, I:E oranı) seçin.

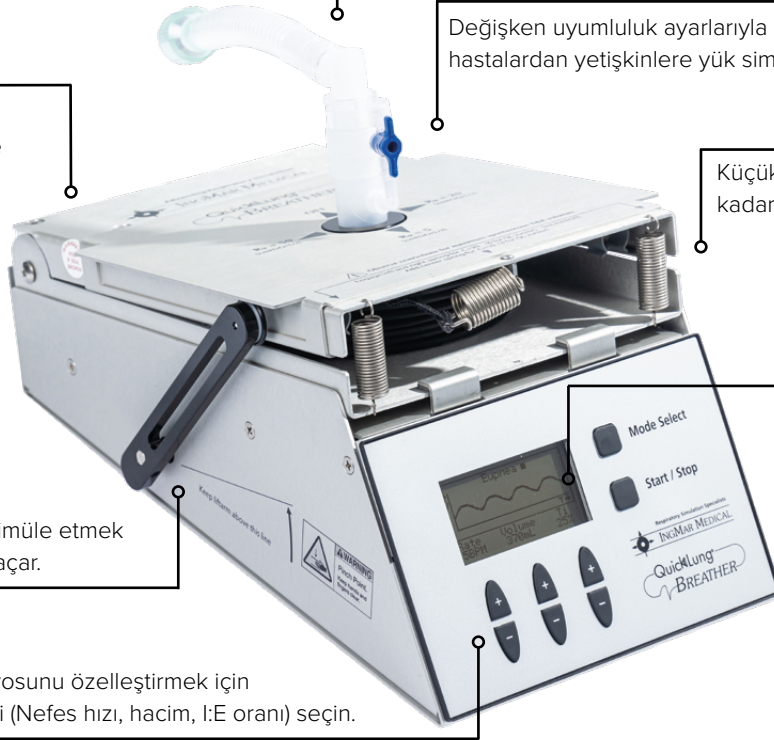


Değişken uyumluluk ayarlarıyla pediatrik hastalardan yetişkinlere yük simülasyonu yapın.

Küçük pediatrik hastalardan yetişkinlere kadar tidal volümler.

Eupnea, Cheyne-Stokes, Biot's, Kussmaul ve Apneusis olmak üzere beş solunum paterni arasından seçim yaparak hızlıca hasta senaryoları oluşturun.


QuickLung  
cihazınız  
var mı?

QuickLung cihazınızı QuickLung Breather'a yükselterek spontan nefes alma deneyimini simüle edin.

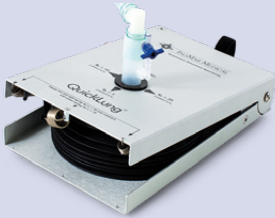


Quick Lung | 1025188\*

+

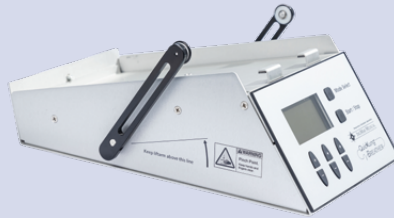

QuickLung Breather seçeneği | 1025207

=

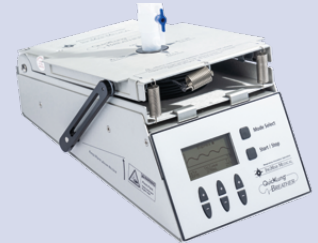

QuickLung Breather | 1025192\*

\* Pediatrik versiyonu da mevcuttur

QUICKLUNG BREATHER HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İÇİN QR KODUNU TARAYIN



3B Scientific TR • Oruçreis Mah. Tekstil Kent Cad. 10-Y Blok Daire 105

34235 Tekstil Kent (B13 Blok- No: 36) • Esenler • İstanbul • Türkiye • [3bscientific.com](http://3bscientific.com)

Phone: + 90 (0)212-422-8800 • Fax: + 90 (0)212-422-8801 • e-mail: [info.tr@3bscientific.com](mailto:info.tr@3bscientific.com)