



Powered by:  iSimulate




ATLAS BABY: EL MIEMBRO MÁS NUEVO DE NUESTRA FAMILIA ATLAS ALS MANIKIN

Entrenamiento del algoritmo ALS con Atlas Baby y REALiTi 360

Presentamos Atlas Baby, el simulador de entrenamiento en soporte vital avanzado pediátrico (PALS) de nuestra familia 3B Scientific Atlas. Este maniquí integral cuenta con una cabeza intubable, tórax apto para RCP, brazos para IV, piernas para IO/IM y un ombligo adicional para la inserción de neonatal. El diseño único de la caja torácica permite compresiones torácicas realistas durante la RCP. Atlas Baby tiene vías respiratorias anatómicamente precisas con todos los detalles necesarios para el entrenamiento en manejo de las vías respiratorias. Libere el máximo potencial de la educación en PALS con Atlas Baby, donde la innovación se combina con la excelencia para ofrecer experiencias de entrenamiento inigualables.

Atlas Baby es inalámbrico y está completamente integrado con REALiTi 360. La combinación de Atlas Baby y REALiTi 360 ofrece una solución completa para entrenamientos PALS que cumplen con las normativas AHA/ERC. Todo el sistema puede usarse inmediatamente y no requiere una configuración técnica sofisticada ni mantenimiento. REALiTi 360 simula una amplia selección de diferentes monitores de pacientes, desfibriladores y ventiladores utilizados en entornos prehospitalarios y hospitalarios.

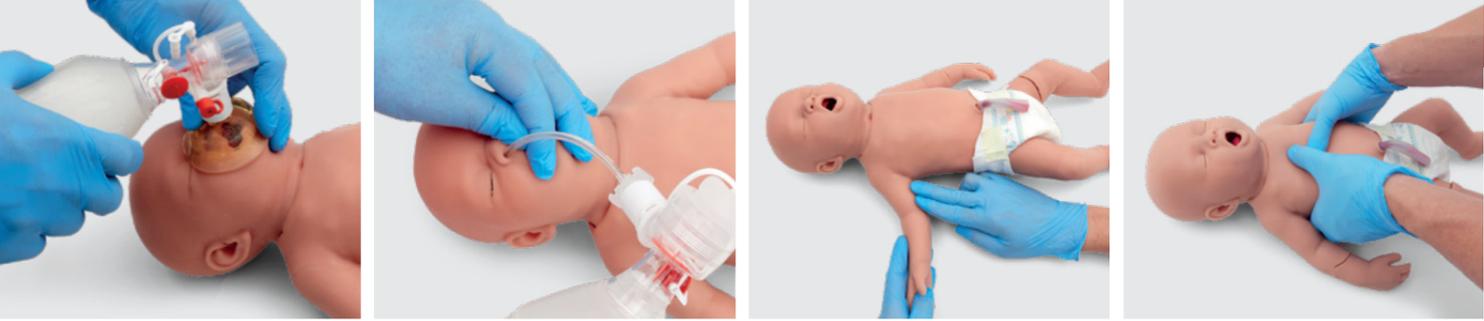

VÍAS RESPIRATORIAS

• Vías aéreas realistas:

- ✓ Lengua
- ✓ Nasofaringe
- ✓ Orofaringe
- ✓ Úvula
- ✓ Epiglotis
- ✓ Cuerdas vocales
- ✓ Esófago
- ✓ Tráquea
- ✓ Carina
- ✓ Pulmón


• Intubación oral y nasal utilizando dispositivos estándar básicos y avanzados de manejo de vías aéreas:

- ✓ OPA
- ✓ NPA
- ✓ ETT
- ✓ iGel
- ✓ LMA
- ✓ LT
- Intubación de rama derecha
- Intubación esofágica
- Insuflación gástrica



NEUROLÓGICO

- Tres tamaños diferentes de pupilas (Contraídas/Normales/Dilatadas)

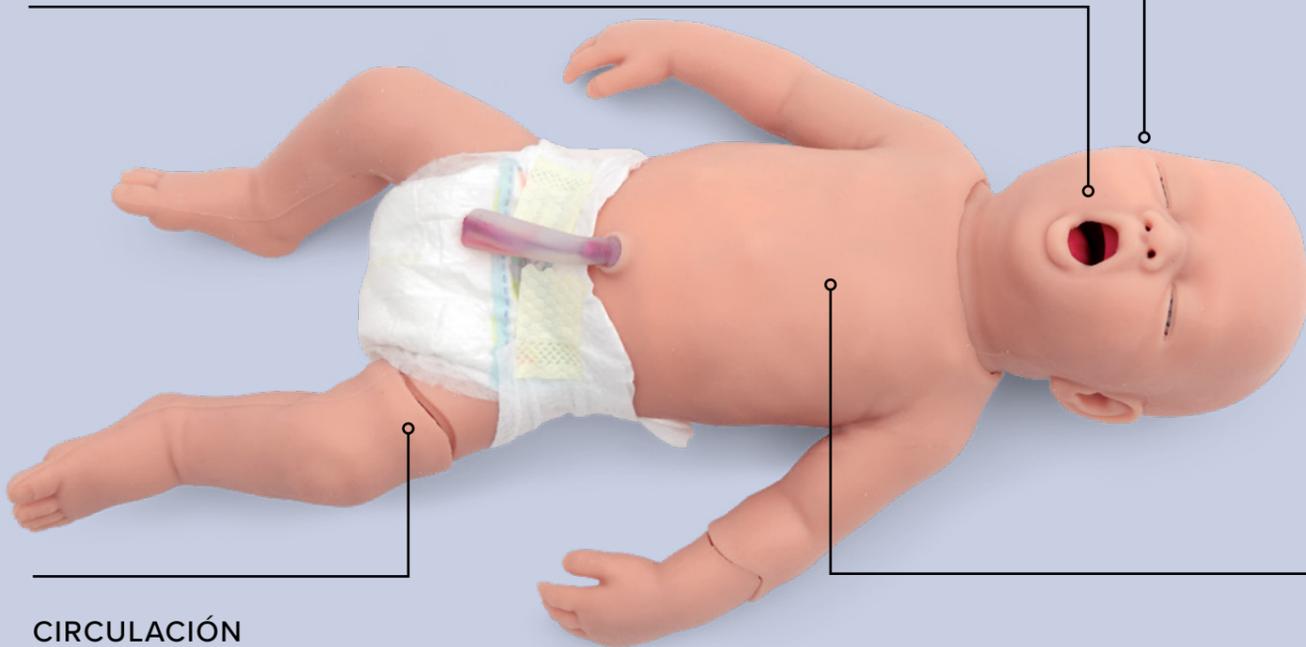

CIRCULACIÓN

- Sitios IV, IO e IM
- Cateterización de la vena umbilical
- Frecuencias de pulso variables
- Intensidad del pulso variable
- Niveles de presión arterial ajustables (sistólica/diastólica)**
- Pulso braquial (sincronizado con ECG)**



REALITI 360 CON ATLAS BABY

REALITI 360 simula una amplia variedad de monitores de pacientes, desfibriladores y pantallas de ventiladores de marcas premium, proporcionando un realismo adicional a su entrenamiento in situ con su maniquí de ALS. La combinación de estos dos productos ofrece una solución completa para el entrenamiento de ALS conforme a las normativas AHA/ERC.

MONITOR DE PACIENTE/DESFIBRILADOR

• Monitor de paciente/Desfibrilador con pantalla configurable de signos vitales:

- ✓ Frecuencia cardíaca
- ✓ Presión arterial
- ✓ Frecuencia respiratoria
- ✓ SpO₂
- ✓ EtCO₂
- ✓ Temperatura

• Escenarios preprogramables

• Enriquecer la simulación mediante medios:

- ✓ Sonidos
- ✓ Radiografías
- ✓ Tomografías computarizadas
- ✓ Laboratorios


• Historial del paciente

• Informe de escenario completo en el Sistema de Gestión de Entrenamiento (TMS)

*Monitor de Paciente Simulado (REALITI 360) debe comprarse por separado

RCP

- Compresiones torácicas
- Ventilación
- Retroalimentación de calidad de RCP en tiempo real**
- Retroalimentación de ventilación en tiempo real**
- Detección de posición de las manos**
- Debriefing (en un informe de rendimiento resumido)**

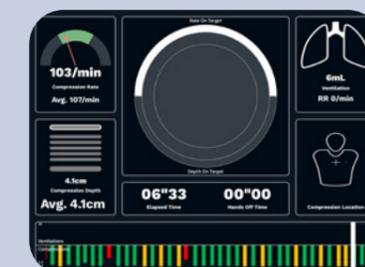


CARDÍACO

- Monitorización integral de signos vitales**
- Desfibrilación**
- Cardioversión**
- Marcapasos**

**En combinación con REALITI 360

Ejemplos de pantallas actualmente disponibles:

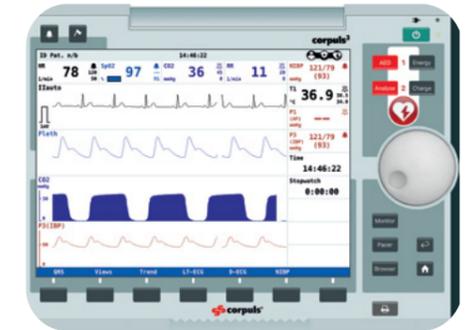

TRANSFORMANDO EL ENTRENAMIENTO DE ALS CON ATLAS Baby & REALITi 360



- Realista, inalámbrico y totalmente móvil, Atlas Baby y REALITi 360 apoyan un **entrenamiento in situ sin esfuerzo**
- No se requieren dispositivos reales ni conectores adicionales para impartir el entrenamiento, **lo que le ahorra** dinero y la necesidad de obtener monitores de pacientes reales y desfibriladores dentro o fuera del hospital
- Gracias a su diseño intuitivo, Atlas Baby **se puede usar directamente al sacarlo de la caja**
- El diseño funcional y robusto de Atlas Baby requiere un **mantenimiento mínimo o nulo**
- Solo necesita un **sistema REALITi** para toda su familia Atlas



ATLAS BABY FACILITA EL ENTRENAMIENTO EN SOPORTE VITAL AVANZADO

Artículo No. 1025291 (piel clara), 1025292 (piel oscura)

- Combine Atlas Baby con cualquier producto REALITi 360 para lograr resultados de simulación más realistas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Altura: 48 cm
- Peso: 2.5 kg
- Color de piel: claro, oscuro
- Tiempo de operación con batería: más de 10 horas
- Inalámbrico: WIFI
- Bolsa de transporte

CONTACTE A NUESTRA OFICINA DE VENTAS HOY PARA

- Reserve una demostración
- Obtenga más información sobre la solución de capacitación ALS de 3B Scientific
- Descubra cómo puede actualizar con Atlas Baby si ya está entrenando con REALITi 360



01/2025

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA O NECESITA AYUDA, POR FAVOR ESCANEE AQUÍ.

