




Powered by:  iSimulate



ATLAS BABY: LE DERNIER NÉ DE LA FAMILLE DES MANNEQUINS ATLAS

FORMATIONS AVANCÉES AVEC REALiTi360 ET ATLAS

Découvrez l'Atlas Baby, le dernier né de la famille des mannequins Atlas pour la réanimation pédiatrique avancée (PALS). Ce mannequin complet est équipé d'une tête intubable, d'un thorax compatible avec la RCP, de bras IV, de jambes IO/IM et d'un ombilic cathétérisable. La conception unique de la cage thoracique permet des compressions thoraciques réalistes pendant la RCP. Atlas Baby possède des voies respiratoires anatomiques précises avec tous les détails requis pour la formation à la gestion des voies respiratoires. Libérez tout le potentiel de la formation PALS avec Atlas Baby. Atlas Baby est sans fil et totalement intégré à REALiTi 360. L'association de l'Atlas Baby et de REALiTi 360 offre une solution complète pour une formation PALS conforme aux normes AHA/ERC. L'ensemble du système peut être utilisé dès déballage et ne nécessite aucune installation ou maintenance technique sophistiquée. REALiTi 360 simule une large sélection de moniteurs, défibrillateurs et ventilateurs utilisés dans les environnements pré-hospitaliers et hospitaliers.

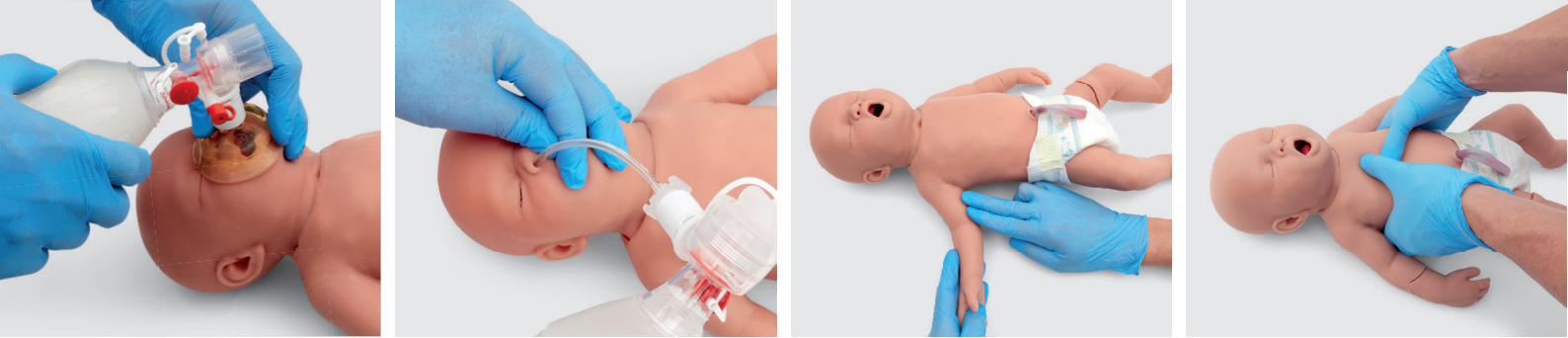


VOIES AÉRIENNES

• VA réalistes avec

- ✓ Langue
- ✓ Nasopharynx
- ✓ Oropharynx
- ✓ Luette
- ✓ Epiglotte
- ✓ Cordes vocales
- ✓ Eosophage
- ✓ Trachée
- ✓ Carène
- ✓ Poumons


• Gestion des voies aériennes à l'aide de dispositifs basiques et avancés.

- ✓ IOT
- ✓ NPA
- ✓ ETT
- ✓ iGel
- ✓ LMA
- ✓ LT
- Intubation de la broche droite
- Intubation oesophagienne
- Insufflation gastrique

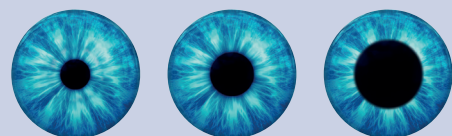

NEUROLOGIQUE

- 3 tailles de pupilles (serrées, normales et dilatées)

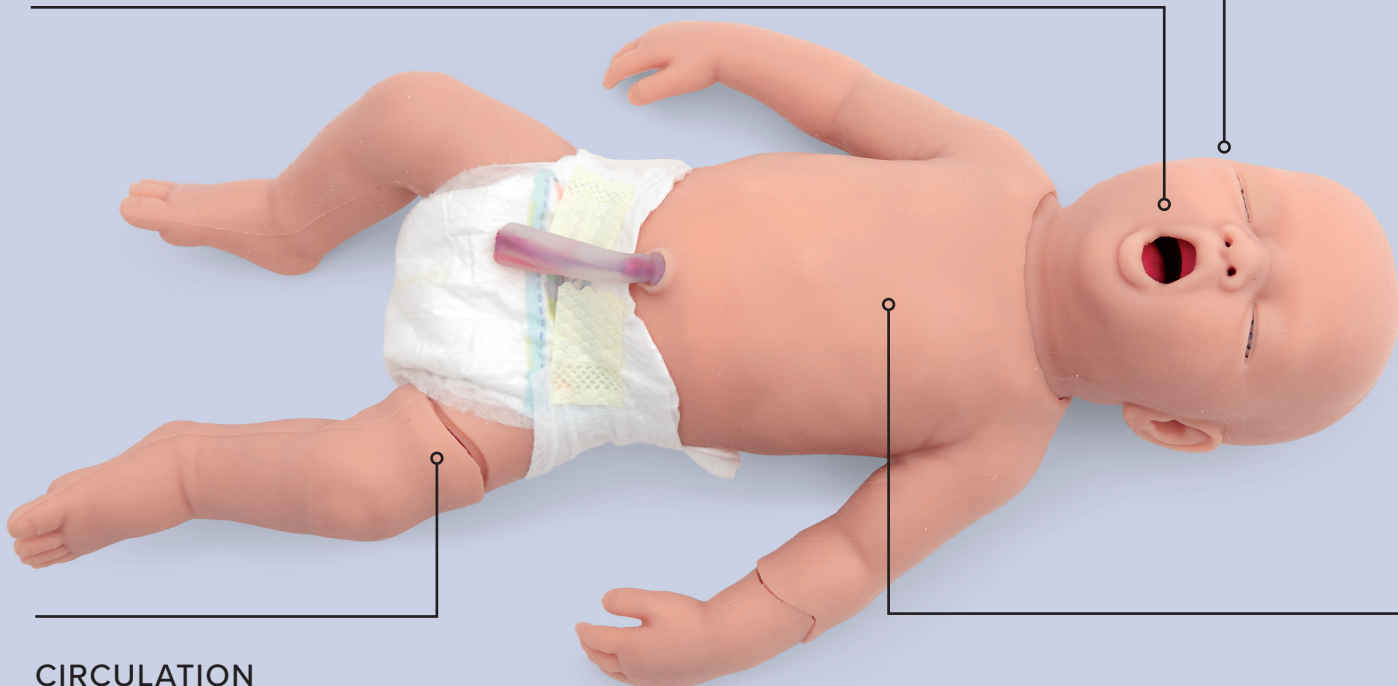

CIRCULATION

- Sites de ponction IV/IO et IM
- Cathétérisation de la veine ombilicale
- Variation de la fréquence cardiaque (Pouls)
- Variable de l'intensité du pouls
- Pression artérielle ajustable (diastolique et systolique)**
- Pouls brachial corrélé à l'ECG**



REALITI 360* AVEC L' ATLAS BABY

REALITI 360 simule une grande variété de moniteurs/défibrillateurs/respirateurs de marque premium, offrant ainsi un réalisme accru à votre formation in situ avec les mannequins Atlas.

L'association de ces deux produits offre une solution complète pour une formation ALS conforme aux normes AHA/ERC.s.

MONITEURS PATIENT ET DÉFIBRILLATEURS

• L'utilisation des moniteurs/défibrillateurs permet l'affichage de:

- ✓ Fréquence cardiaque
- ✓ Pression artérielle
- ✓ Fréquence respiratoire
- ✓ SpO₂
- ✓ EtCO₂
- ✓ Température

• Scénarios préprogrammables

Bibliothèques de médias intégrées:

- ✓ Sons physiologiques / auscultatoires
- ✓ Radiographies
- ✓ CT Scanner
- ✓ Biologie


• Dossier patient

- Rapport de simulation complet dans le système de gestion de la formation (TMS))

*Le simulateur de monitoring (REALITI 360) doit être acheté séparément

RCP

- Compressions thoraciques
- Ventilation
- Feedback en temps réel de la RCP**
- Feedback en temps réel de la ventilation**
- Détection de la position des mains**
- Rapport complet de la qualité de la réanimation

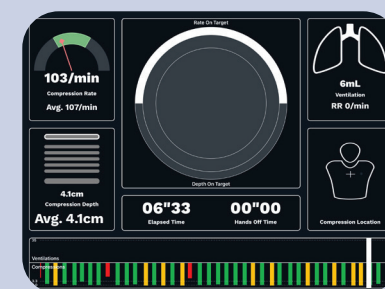


CARDIAQUE

- Surveillance complète des signes vitaux**
- Défibrillation**
- Cardioversion**
- Pacing**

**Uniquement avec REALITI 360

Aperçu des écrans disponibles

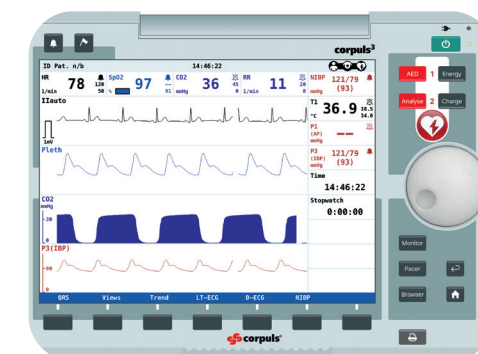

FAITES ÉVOLUER VOS FORMATIONS AVEC ATLAS BABY



- Réalistes, sans fil et mobiles, **Atlas Baby et REALiTi 360** permettent une formation in situ efficace.
- Aucun dispositif supplémentaire n'est nécessaire, ce qui vous permet **d'économiser de l'argent** et de ne pas mobiliser de moniteurs/défibrillateurs opérationnels.
- Grâce à sa conception intuitive, Atlas Baby **peut être utilisé dès son déballage**.
- Sa conception fonctionnelle et robuste se traduit par une **maintenance minimale, voire inexistante**.
- Seul un système REALiTi est nécessaire pour utiliser toute la famille Atlas.



ATLAS BABY PERMET LA RÉANIMATION AVANCÉE

Ref 1025291 (peau claire), 1025292 (peau sombre)

- Associez Atlas Baby avec n'importe quel produit REALiTi 360 pour améliorer le réalisme.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Taille: 48 cm
- Poids: 2.5 kg
- Couleurs de peau : claire et sombre
- Autonomie de la batterie: supérieure à 10 heures
- Connection: WIFI
- Sac de transport

CONTACTEZ NOUS DÈS AUJOURD'HUI POUR

- Une démonstration
- En savoir plus sur l'écosystème REALiTi360
- Comment mettre à jour votre système REALiTi avec l'Atlas Baby



01/2025

N'HÉSITEZ PAS SCANNER LE QR CODE POUR PLUS D'INFORMATIONS

