



Powered by:  iSimulate




ATLAS BABY: O MAIS NOVO MEMBRO DA NOSSA FAMÍLIA DE MANIQUINS ATLAS ALS

TREINAMENTO DE ALGORITMO ALS COM ATLAS BABY E REALiTi 360

Apresentamos o Atlas Baby, o simulador de suporte avançado de vida pediátrico (PALS) da nossa família 3B Scientific Atlas. Este manequim abrangente apresenta uma cabeça intubável, um tórax apto para RCP, braços para administração intravenosa, pernas para administração intraóssea/intramuscular e um umbigo extra para inserção de cateter umbilical neonatal. O design único da caixa torácica permite compressões torácicas realistas durante a RCP. O Atlas Baby possui vias aéreas anatomicamente precisas com todos os detalhes necessários para o treinamento em manejo das vias aéreas. Liberte todo o potencial da educação em PALS com o Atlas Baby – onde inovação encontra excelência para experiências de treinamento incomparáveis.

O Atlas Baby é sem fio e totalmente integrado com o REALiTi 360. A combinação do Atlas Baby com o REALiTi 360 oferece uma solução completa para treinamentos PALS compatíveis com as normas AHA/ERC. Todo o sistema pode ser usado imediatamente após a abertura da caixa e não requer configuração técnica sofisticada ou manutenção. O REALiTi 360 simula uma ampla seleção de diferentes monitores de pacientes, desfibriladores e ventiladores usados em ambientes pré-hospitalares e hospitalares.

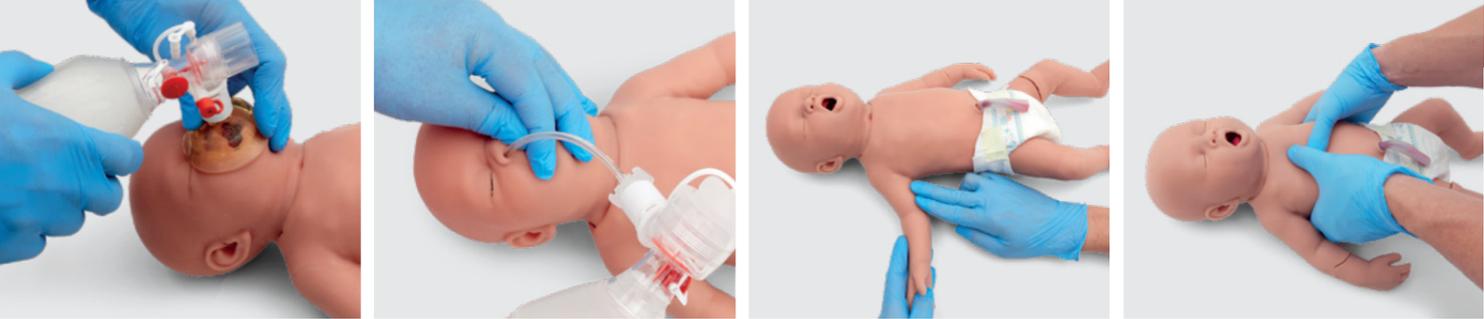

VIAS AÉREAS

• Vias aéreas realistas:

- ✓ Língua
- ✓ Nasofaringe
- ✓ Orofaringe
- ✓ Úvula
- ✓ Epiglote
- ✓ Cordas vocais
- ✓ Esôfago
- ✓ Traqueia
- ✓ Carina
- ✓ Pulmão


• Intubação oral e nasal utilizando dispositivos padrão básicos e avançados de manejo de vias aéreas:

- ✓ OPA
- ✓ NPA
- ✓ ETT
- ✓ iGel
- ✓ LMA
- ✓ LT
- Intubação do ramo direito
- Intubação esofágica
- Insuflação gástrica



NEUROLÓGICO

- Três tipos diferentes de pupilas (Contraídas/Normais/Dilatadas)

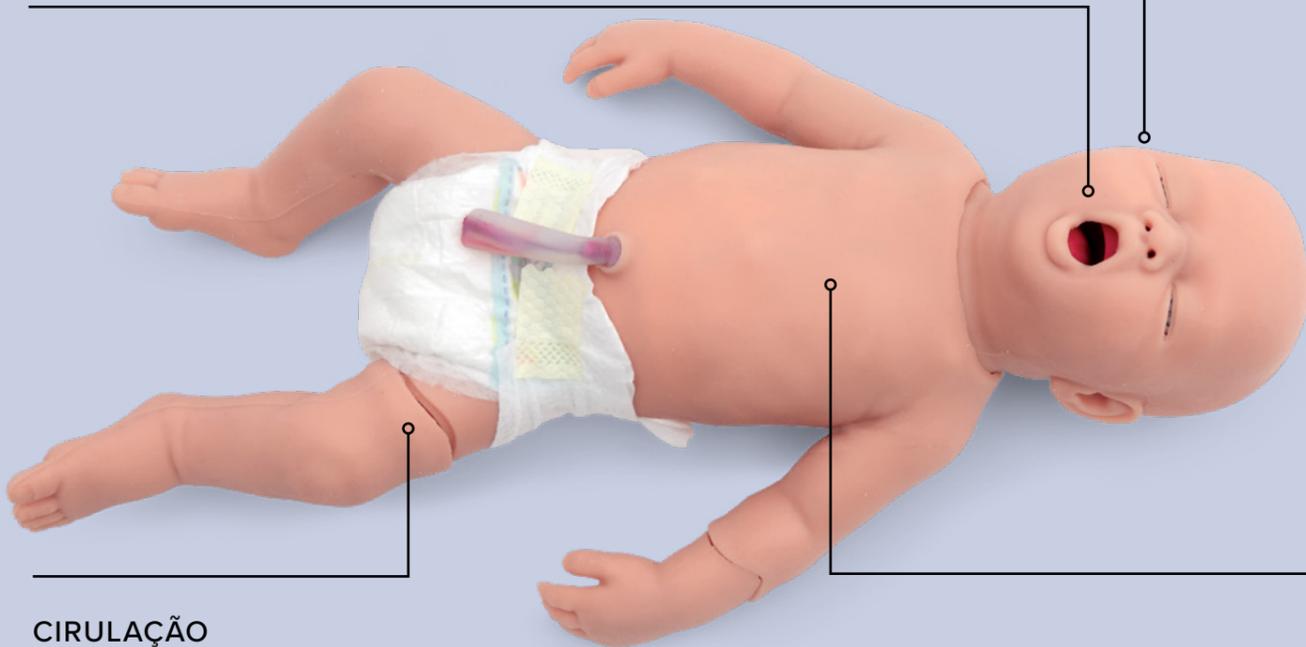

CIRULAÇÃO

- Sites IV, IO e IM
- Cateterização da veia umbilical
- Frequências de pulso variáveis
- Intensidade de pulso variável
- Níveis de pressão arterial ajustáveis (sistólica/diastólica)**
- Pulsação braquial (sincronizada com ECG)**



REALITI 360* COM ATLAS BABY

REALITI 360 simula uma ampla variedade de monitores de pacientes, desfibriladores e telas de ventiladores de marcas premium, proporcionando maior realismo ao seu treinamento in situ com seu manequim para ALS. A combinação desses dois produtos oferece uma solução completa para treinamento de ALS conforme as normas da AHA/ERC.

MONITOR DE PACIENTE/DESFIBRILADOR

- Monitor de paciente/Desfibrilador com exibição configurável dos sinais vitais:

- ✓ Frequência Cardíaca
- ✓ Pressão Arterial
- ✓ Frequência Respiratória
- ✓ SpO₂
- ✓ EtCO₂
- ✓ Temperatura

- Cenários pré-programáveis

- Enriquecer a simulação por meio de mídia:

- ✓ Sons
- ✓ Raios-X
- ✓ Tomografias Computadorizadas (TC)
- ✓ Exames Laboratoriais

- Prontuário do paciente

- Relatório abrangente de cenário no Sistema de Gestão de Treinamento (SGT)

*Monitor de Paciente Simulado (REALITI 360) a ser adquirido separadamente

RCP

- Compressões Torácicas
- Ventilação
- Feedback de CPR de Qualidade em Tempo Real**
- Feedback de Ventilação em Tempo Real**
- Detecção da Posição das Mãos**
- Debriefing (em um relatório de desempenho resumido)**




CARDÍACO

- Monitoramento abrangente de sinais vitais**
- Desfibrilação**
- Cardioversão**
- Marcapasso**

**Em combinação com REALITI 360

Exemplos de telas atualmente disponíveis:

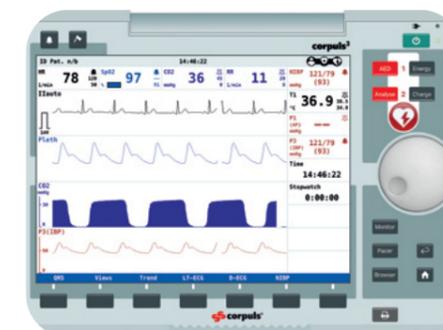

TRANSFORMANDO O TREINAMENTO DE SUPORTE AVANÇADO DE VIDA COM ATLAS Baby & REALITi 360



- Realista, sem fio e totalmente móvel, Atlas Baby e REALITi 360 suportam treinamentos in situ sem esforço
- Não são necessários dispositivos reais nem conectores adicionais para realizar os treinamentos, economizando seu dinheiro e evitando a necessidade de adquirir monitores de pacientes e desfibriladores reais dentro ou fora do hospital
- Graças ao seu design intuitivo, Atlas Baby pode ser usado imediatamente após a abertura da embalagem
- O design funcional e robusto do Atlas Baby exige pouca ou nenhuma manutenção
- Você precisa de apenas um sistema REALITi para toda a sua família Atlas



ATLAS BABY PARA TREINAMENTO DE SUPORTE AVANÇADO DE VIDA

Item nº 1025291 (pele clara), 1025292 (pele escura)

- Combine Atlas Baby com qualquer produto REALITi 360 para obter resultados de simulação mais realistas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Altura: 48 cm
- Peso: 2,5 kg
- Cor da pele: clara, escura
- Tempo de operação com bateria: mais de 10 horas
- Sem Fio: WIFI
- Bolsa de Transporte

ENTRE EM CONTATO COM NOSSO ESCRITÓRIO DE VENDAS HOJE TO

- Agende uma demonstração
- Saiba mais sobre a solução de treinamento ALS da 3B Scientific
- Descubra como você pode fazer upgrade com Atlas Baby se já estiver treinando com REALITi 360



SE VOCÊ TIVER ALGUMA DÚVIDA OU PRECISAR DE SUPORTE, POR FAVOR, ESCANEIE AQUI

